



Multifunkciós intenzív pulzáló fény (IPL)
epilátor (háztartási használatra)
SKB-T08

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék felépítése

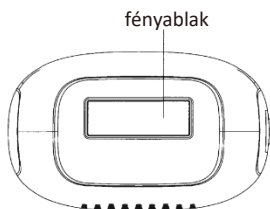

Hosszú gombnyomás: ki/bekapcsolás, rövid gombnyomás: fokozat beállítás

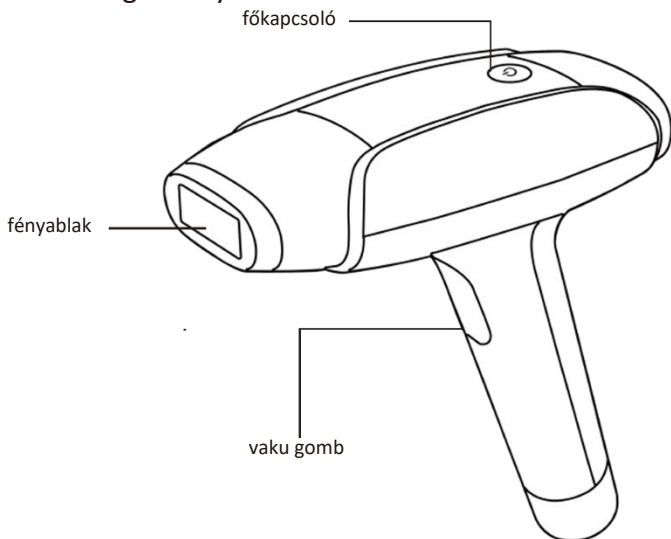

Egy gombnyomás: vakuzás, két gombnyomás: üzemmódváltás

Üzemmódok leírása



- Bőrifiatalítás: A bőr szépítése, akne eltávolítása



- Arc szőrtelenítése



- Test szőrtelenítése



- Bikinivonal szőrtelenítése

Szőrtelenítő üzemmód

- Szőrtelenítés, akne eltávolítása és bőrifiatalítás.

Üzemmód váltása

- Üzemmódok közötti váltáshoz nyomja meg a vaku gombot egymás után kétszer.

Akne eltávolítás alapelve


- A lézer mélyen behatol a bőrszövetbe, ahol a melanin eltávolítása révén éri el a bőrifiatalító hatását, egyben eltávolítja a pigmentfoltokat. A lézertény besugárzás stimuláló hatásának köszönhetően elősegíti a bőr anyagcseréjét és stimulálja a szubkután kollagén regenerációt, és eltünteti az akne nyomokat.

Bőrifiatalítás alapelve

- Az IPL készülék bőrifiatalító működése a szelektív fototermális hatáson alapszik. A nagyobb hullámhosszúságú intenzív pulzáló fény nagyobb hullámhosszúságú fény képes behatolni a bőrszövet mélyebb rétegeibe, ahol hőhatást és fotokémiai hatást fejt ki. Többek között képes átrendezni és regenerálni az elasztikus rostokat, mellyel visszaállítja a szövet rugalmasságát, így fiatalítva a bőrt.

Az intenzív pulzáló fény alapú epiláció alapelve

- A szőr növekedési üteme egyéni tulajdonság, függ a kortól, anyagcserétől, és egyéb tényezőktől. A szőrnövekedés három szakaszra osztható.

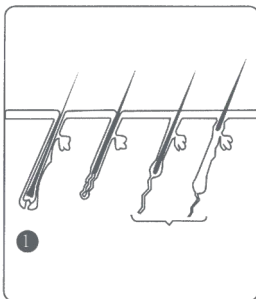

1. Növekedési fázis: A szőr aktívan növekszik a szőrtüszőkből kiindulva.

Ebben a szakaszban a legmagasabb a melanin koncentrációja. A melanin határozza meg a szőrszál színének kialakulását.

2. Átmeneti fázis: A szőr növekedése lassul, a szőrtüsző összezsugorodik.

3. Nyugalmi fázis: A szőrtüsző elszarusodik, nincs szőrnövekedés. Ez a szakasz 2-4 hónapig tart.

Termékleírás

- Az erős pulzáló fény technológia (IPL) tökéletesen illeszkedik az otthoni használatú szőrtelenítő készülékek közé. Ez a technika egészségügyi intézményekben és szépségszalonokban már ismert és bizonyított és ma teret hódítanak a háztartásokban is alkalmazható készülékek.

• Sokoldalú

A hasonló termékekkel ellentétben egy készülékben ajánl megoldást a bőrfiatalításra és különböző testrészek szőrtelenítésére, mint arc, test és bikinivonal

• Selymesen sima bőr – minden nap

Két hét használat után láthatóan csökken a szőrszálak száma. 4-5 hét használat után az eredmény jól látható, a szőrmennyiség minden használat után láthatóan ritkul.

• Biztonságos


Az IPL technológiát alkalmazó otthoni használatra szánt szőrtelenítő készülék csökkentett fényenergiája biztosítja, hogy a bőr ne sérülhessen a kezelés hatására.

• Multifunkcionális

Bármikor, könnyedén átválthatunk a három fő funkció között (szőrtelenítés, bőrfiatalítás, akne eltávolítás).


• Tudományos

A „hasznos fotonok” szelektív fototermális hatása: A használt specifikus hullámhosszúságú fény kizárólag a fekete szőrtüszőkön fejt ki hatását, ezáltal szelektíven a szőrtüszőben keletkezik a hő, amely végeredményben a szőr kihullását okozza.

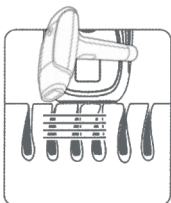


A készülék közvetlenül a szőrtüszőkre hat az intenzív pulzáló fény segítségével. A fényenergia a szőrtüszőkben átalakul hőenergiává. A melanin nyeli el a fényenergiát, ezáltal elhalnak a szőrtüszők, az atrófia következtében nyugalmi fázisba lép a szőrtüsző, hosszútávon nem jelentkezik szőrnövekedés.

Minél sötétebb a szőrszál (vagyis minél nagyobb a melanin-tartalma), annál több pulzáló fényt fog elnyelni.

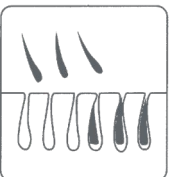

A besugárzás hatására a szőrszál magától kihullik, és a besugárzott fény gátolja a szőrnövekedést.

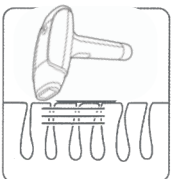

A megfelelő szőrtelenítő hatás érdekében rendszeres besugárzás szükséges. A fény csak a növekedési szakaszban lévő szőrtüszőkre tudja kifejteni a hatását. A szőrtüszők mindhárom fázisában lévő tüszők egyszerre vannak jelen a bőrben, ezért nem lehetséges egyszerre kezelni valamennyi szőrtüszőt. Annak érdekében, hogy minden szőrtüszőt elérjen a kezelés a megfelelő, hatékonyan kezelhető szakaszában, a kezelést legalább kéthetente szükséges megismételni.

SPECIFIKÁCIÓK

Akkumulátor kapacitás	2000 mAh
Feszültség	7,4 V
Fényerősség	5 fokozat
Működési környezeti hőmérséklet	5°C-40°C
Működési relatív páratartalom	<80%
Teljesítmény	36 W
Környezeti feltétel	Ne tegye ki közvetlen napfénynek!
Kibocsátott fény hullámhossza	530-1100 nm
Töltési idő	90 perc
Nettó tömeg	335 g


Villanásonkénti energia-értékek

	1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	5. fokozat
Bőrszépítés	6,87	7,59	8,27	8,98	10,14
Arc	7,27	8,28	9,22	10,15	10,87
Test	7,37	8,76	10,11	11,44	13,22
Bikivonal	6,9	7,86	8,83	9,8	11,21

Egy teljes akkumulátor-töltéssel elérhető teljesítmény

	1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	5. fokozat
Működési időtartam	40 perc	38 perc	36 perc	32 perc	30 perc
Impulzusszám	1200	1000	800	700	540
Impulzus frekvencia	30/perc	27/perc	24/perc	22/perc	18/perc

A csomag tartalma

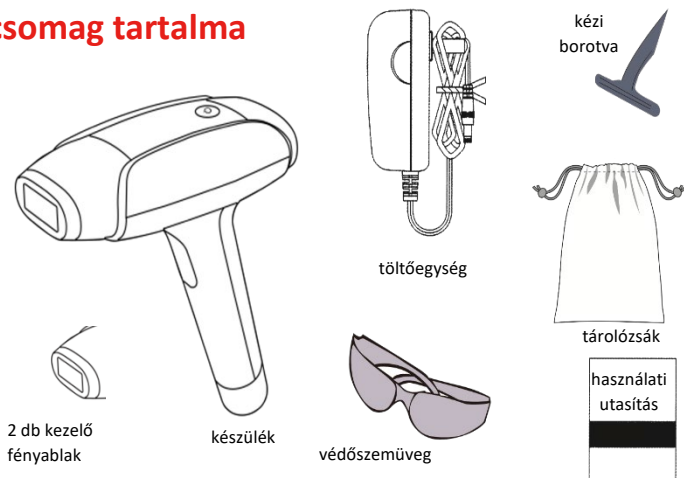

A készülék használata

- Helyezze a kezelésnek megfelelő fényablakot a készülékre.
 - Sárga fényablak: arckezelés
 - Piros fényablak: szőrtelenítés
- Főkapcsoló:
 - hosszú gombnyomás: be / ki
 - rövid gombnyomás: fokozat beállítása
- Vaku gomb:
 - egy gombnyomás: vakuzás
 - két gombnyomás: üzemmód váltás

Előkészületek szőrtelenítéshez



- Alaposan tisztítsa meg és szőrtelenítse a kezelendő bőrfelületet. Győződjön meg róla, hogy nem maradtak szőrszálak a felületen. A felületnek száraznak kell lennie, ne legyen rajta olajos anyag (krémek, parfümök, napvédő termékek).
- Győződjön meg róla, hogy a fényablak kosz- és pormentes, nem tapadt rá por vagy szőrszál. Ha szükséges, tisztítsa meg a fényablakot. Ellenőrizze, hogy az ablak törés- és repedésmentes, törött, repedt fényablakú készüléket ne használjon! Sérült, szennyezett készülék használata a készülékbe üzemszavarhoz vezethet, a szőrnövekedés-gátló hatást károsan befolyásolja és akár bőrsérüléshez vezethet!

A fényintenzitás beállítása

Ezt a készüléket kifejezetten otthoni szőrtelenítésre fejlesztették, ezért a kibocsátott fényimpulzus a professzionális változatokkal összehasonlítva lágyabb, gyengédebb.

Valamennyi üzemmód öt fényintenzitás-beállítással használható, amelyek közül a felhasználó választhatja ki a számára legideálisabb energiaszintet. Az intenzitás beállításakor figyelembe kell venni a bőr és a szőrzet színét, valamint az egyéni érzékenységet.

A megfelelő intenzitás kiválasztásában a lap alján látható ábra segít eligazodni 2 lépésben:

1. A táblázat segítségével állapítsa meg a bőr- és hajszínéhez illeszkedő beállításokat (a papírt a bőrre illesztve pontosabban megállapíthatja bőrszínét).

2. Amennyiben fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, csökkentse az intenzitást.

A sötétebb bőrszínnel rendelkező egyének esetében gyakrabban jelentkezhetnek allergiás tünetek, mivel a sötétebb bőr több energiát nyel el. Ezért a sötétebb bőrű személyek számára alacsonyabb fokozat javasolt.

A pulzáló fény hőérzettel jár, a bőrben melegséget érezhetünk, amely normális. Fájdalmat azonban nem szabad okoznia!

BŐRSZÍN \ SZŐRZET SZÍN	BŐRSZÍN					
	1	2	3	4	5	6
fehér/ész	×	×	×	×	×	×
vörös	×	×	×	×	×	×
világosszőke	×	×	×	×	×	×
sötétszőke/világosb	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
arna barna	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
sötétbarna	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
fekete	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

Az × jelentése: Ezekre a kombinációkra nem alkalmazható a módszer.

Bizonyos okoknál fogva egyes besugárzási idő esetében és bizonyos alkalmakkor az ugyanazon személy által tapasztalt hatások eltérhetnek.

Intenzitás-tesztelés

Minden felhasználó számára szükséges intenzitás-tesztet végezni, amely során kiderül, hogy a bőrfelület megfelelőképpen reagál-e a fényimpulzusra. A teszt segítségével megállapítható a megfelelő intenzitás-beállítás is.

- Válasszon egy területet, közel a kezelendő bőrfelülethez. (Kérjük, a készüléket ne alkalmazza nehezen elérhető, vagy érzékeny területen, mint pl. boka és csontos részek).
- Nyomja meg hosszan a főkapcsolót.
- Illesze a készüléket a bőrre függőlegesen. Törekedjen rá, hogy a vakuablak teljesen illeszkedjen a tesztelendő felületre.
- Nyomja meg a vaku gombot a vakuzáshoz.
- Csúsztassa el a készüléket a bőrön, tovább a következő tesztelendő területre.
- Lépésenként növelje a fényintenzitást, vakuzzon, majd haladjon a következő területre. Ismételje, ameddig az Ön számára a bőrtípusa alapján javasolt intenzitás-szinteket végigpróbálta.
- Két órával a tesztelés után ellenőrizze a bőre állapotát. Ha nem lát olyan elváltozásokat, mint kipirosodás, hólyagok, akkor az adott intenzitás-szint beállításával a készülék magabiztosan alkalmazható

Szőrtelenítési alapismeretek

1. Szőrtelenítés a hónalj tájékán

– Szőrtelenítés előtt tisztítsa meg a hónaljat minden kozmetikumtól, úgy mint dezodor, parfüm, krémek, stb.

– Feszítse meg a bőrt az ujjával ott, ahol laza a bőr.

Enyhe égő érzés jelentkezhet, amely az érzékeny területen normális.

2. Szőrtelenítés a bikinivonal tájékán

– Az előforduló pigment-felhalmozódás miatt, ezen a területen sötétebb lehet a bőrszín, kérjük, alacsonyabb fokozatra állítsa a készüléket ezeken a területeken, amíg megszokja az IPL hatását.

3. Karok és lábak szőrtelenítése

– A kiálló csontos területeken és az egyenetlenségeknél hatékonyabb, ugyanakkor fájdalmasabb lehet a szőrtelenítés. Ezekon a területeken normális az erősebb kipirosodásra való hajlam.

Az alábbi területeken ne használja a készüléket:

– Napégés által érintett terület, sötét pigmentfoltok, szemgolyók, szemhéj, szemkörnyék, fagyási foltok, anyajegyek, homlok, szemöldök, hajas fejbőr.

Szőrtelenítés után 24 órán keresztül kerülje az ultraibolya fényt, hogy megkímélje az epilált bőrfelszínt a napégéstől.

Ne nézzen bele közvetlenül a vakuba!

Előkészületek Arckezeléshez

Cserélje le készüléke fényablakát a sárga fényű kezelőfejre.

Állítsa a készüléket arckezelés üzemmódba.

Alaposan tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet. A felületnek száraznak kell lennie, ne legyen rajta olajos anyag (smink, krémek, parfümök, napvédő termékek).



- **Bőrfiataltítás:** A bőr szépitése, akne eltávolítása

Győződjön meg róla, hogy a fényablak kosz- és pormentes, nem tapadt rá por vagy szőrszál. Ha szükséges, tisztítsa meg a fényablakot. Ellenőrizze, hogy az ablak törés- és repedésmentes, törött, repedt fényablakú készüléket ne használjon! Sérült, szennyezett készülék használata a készülékben üzemzavarhoz vezethet, a bőrszépítő hatás befolyásolja és akár bőrsérüléshez vezethet!

- Ne használjunk barnító krémet, kerüljük a szolárium használatát és a napozást.
- A kezelendő területen ne történjen mélyhámlesztás a kezelés előtti 2 hétben és a kezelés után 1 héttel.

A fényintenzitás beállítása

Ezt a készüléket kifejezetten otthoni arckezelésre fejlesztették, ezért a kibocsátott fényimpulzus a professzionális változatokkal összehasonlítva lágyabb, gyengédebb.

Valamennyi üzemmód öt fényintenzitás-beállítással használható, amelyek közül a felhasználó választhatja ki a számára legideálisabb energiaszintet. Az intenzitás beállításakor figyelembe kell venni a bőr színét, valamint az egyéni érzékenységet.

Amennyiben fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, csökkentse az intenzitást.

A sötétebb bőrszínnel rendelkező egyének esetében gyakrabban jelentkezhetnek allergiás tünetek, mivel a sötétebb bőr több energiát nyel el. Ezért a sötétebb bőrű személyek számára alacsonyabb fokozat javasolt.

A pulzáló fény hőérzettel jár, a bőrben melegséget érezhetünk, amely normális. Fájdalmat azonban nem szabad okoznia!

Intenzitás-tesztelés

Minden felhasználó számára szükséges intenzitás-tesztet végezni, amely során kiderül, hogy a bőrfelület megfelelőképpen reagál-e a fényimpulzusra. A teszt segítségével megállapítható a megfelelő intenzitás-beállítás is.

1. Válasszon egy területet, közel a kezelendő bőrfelülethez. (Kérjük, a készüléket ne alkalmazza nehezen elérhető, vagy érzékeny területen, mint pl. boka és csontos részek).
2. Nyomja meg hosszan a főkapcsolót.
3. Illessze a készüléket a bőréhez függőlegesen. Törekedjen rá, hogy a vakuablak teljesen illeszkedjen a tesztelendő felületre.
4. Nyomja meg a vaku gombot a vakuzáshoz.
5. Csúsztsza el a készüléket a bőrön, tovább a következő tesztelendő területre.
6. Lépésenként növelje a fényintenzitást, vakuzzon, majd haladjon a következő területre. Ismétlje, ameddig az Ön számára a bőrtípusa alapján javasolt intenzitás-szinteket végigpróbálta.
7. Két órával a tesztelés után ellenőrizze a bőre állapotát. Ha nem lát olyan elváltozásokat, mint kipirosodás, hólyagok, akkor az adott intenzitás-szint beállításával a készülék magabiztosan alkalmazható.

Használat után 24 órán keresztül kerülje az ultraibolya fényt, hogy megkímélje a kezelt bőrfelszínt a napégéstől.

Ne nézzen bele közvetlenül a vakuba!

Használati utasítás


Manuális vakuzás mód



1. Arckezeléshez tisztítsa meg a kezelni kívánt bőrfelületet.




1. Szőrtelenítéshez Borotválja le a kezelni kívánt felületet az esetleg előforduló szőrszálaktól borotválással

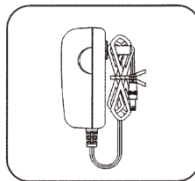

2. Csatlakoztassa a töltőt a készülékhez, majd a hálózathoz.




6. Fontos! Viselje a csomagban található védőszemüveget, és kerülje a szembevakuzást!

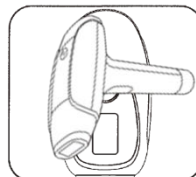


7. Helyezze a készüléket függőlegesen a kezelendő felületre. Illessze a fényablakot teljes felületén a bőrre. Nyomja meg a vaku gombot a szőrtelenítés megkezdéséhez. Ebben a módban egy gombnyomás egy vakuzást jelent. (A manuális vakuzást ajánljuk kezdők számára, és kisebb területek kezeléséhez, pl. hónalj, bikinivonal.)



3. Helyezze a készülékre a kezelési módnak megfelelő fényablakot. Majd nyomja a főkapcsolót 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.

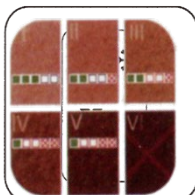

4. Válassza ki a megfelelő intenzitás-beállítást a mellékelt bőrszín-kártya segítségével. Ha az X eredményt kapja, kérjük ne használja ezt a készüléket. **Ha először használja a készüléket, javasolt az 1. beállítás használata.**

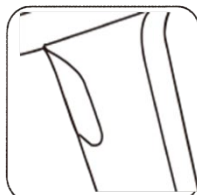


5. A kiválasztott intenzitás beállításához nyomja meg röviden a főkapcsolót. Ekkor az 1 beállítás jelenik meg, melyet újabb rövid gombnyomással állíthat át, egészen 5-ig. Első használatkor az 1. fokozat használata javasolt, majd emelheti a fokozatot, amíg nem érez kellemetlenséget. Általánosságban: a magasabb fokozat erősebb szőrtelenítő hatást jelent.

Automata vakuzás mód




1. Nyomja le és tartsa nyomva a főkapcsolót 2 másodpercig.

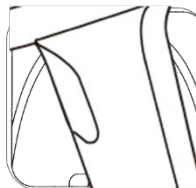

2. Nyomja meg hosszan a vaku gombot a folyamatos vakuzáshoz
Megj.: ha a főkapcsoló melletti kék fény villog, miután a fény a bőrhöz közel van, ez azt jelenti, hogy vakuzhatunk. Ha a kék fény folyamatosan világít, igazítsa meg a lámpát, hogy megbizonyosodjon róla, megfelelően illeszkedik a bőrre (ha ezután villogni kezd a kék fény, vakuzhat). Az automata üzemmódban nem kell vakuzáshoz megnyomni a vaku gombot, mert a vakuzás automatikusan történik.

Megj.: Ebben a módban a vakut a vaku gomb egyszeri megnyomásával sütheti el.

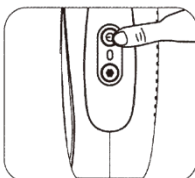

Megj.: Kikapcsolás után, mivel a készülék működés közben felmelegszik, a hűtési rendszer egy ideig még dolgozik. Ez normális jelenség, kérjük, mielőtt áramtalanítaná a készüléket, várja meg hogy a hűtés kikapcsoljon.

Kezelés utáni teendők

- Szórtelenítés után kérjük, kezelje hűsítő zselével a kezelt felületet.
- Arckezelést és szórtelenítést követő 6 órában javasolt kerülni a vízzel való érintkezést.
- Kezelés után ne használjon illatanyag-tartalmú szereket, maszkokat és mikrogyöngyöket tartalmazó kozmetikumokat.
- Kerülje az ultraibolya (UV) sugárzást a kezelést követő 24 órában.
Ha napra kell mennie, alkalmazzon fizikai UV-védelmet (napernyő, kalap, de kerülje a naptejet, napvédő krémet!).
- Bármilyen panasz esetén keressen orvosi segítséget!
- A napozás elszíneződést, napégést okozhat a bőrfelületen!
- Az epilált bőrfelületet tilos napfénynek kitenni a készülék használatát követő 48 órában belül! Ha ez elkerülhetetlen, mindig figyeljen oda az esetlegesen jelentkező káros hatásokra, mellékhatásokra! 72 óra után használjon 30+ faktoros napvédő krémet.
- A szórtelenítés folyamata alatt tilos az olyan módszerek használata, amelyek mesterséges fényvel halványítják a bőrszínt.
- Amennyiben a szórtelenített felületen plasztikai műtetre van szükség, azt megelőzően egyeztessen orvosával!
- Az arckezelés kezeléseket utáni 2-3 hétben fontos a nap kerülése, magas faktorszámú fényvédő használata, a kezelést követő napokban az uszoda, szaunázás, forró fürdőzés kerülése.

Javasolt kezelési idő szórtelenítéshez

Kezdeti szakasz

A szórtelenítés kezdeti szakaszában (1-8. hét) heti 2 kezelés javasolt, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szőrtüsző kezelése megtörténjen.

Megj.: Ha lecsereéli, vagy felváltva használja az IPL-t más módszerrel, az nem segíti elő az epilálás hatékonyságát.


Fenntartó szakasz

Annak érdekében, hogy a bőre mindig sima legyen, javasoljuk, hogy 9-12 hetente végezzen ismétlődő kezelést. Az ismétlődő kezeléseket között eltelt idő egyénileg változhat, a szőr regenerálódási képességeihez mérten. Az ismétlődő kezelés megfelelő ideje testrészenként eltérhet. Ha erősebb szőrnövekedést észlel, rövidítse az ismétlésig eltelt időt.

Az optimális epilálási időszak

Növekedési szakasz: Borotválkozás után a szőr aktívan növekszik a szőrtüszőből kiindulva. Ekkor a legmagasabb a melanin koncentrációja, amely a szőr vastagságát és színét határozza meg. Ebben a fázisban a melanin nagyon érzékeny a fény hatásaira. Ezért a legmegfelelőbb ez a növekedési szakasz az IPL technológián alapuló készülékkel történő kezelésre.

Kezelési idők testrészenként

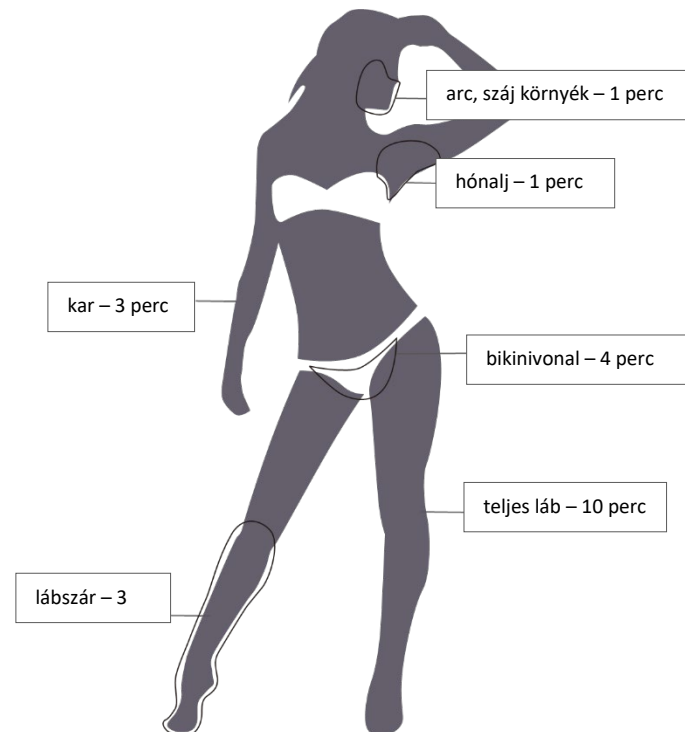

Ha azonban a javasolt és szükséges mértéknél gyakrabban használja a készüléket, a szőrtelenítő hatás nem fog erősödni. Káros bőrreakciók azonban előfordulhatnak a túlzott használat következtében.

A szőrtelenítés hatásfoka egyénenként változhat, ezért a szőrtelenítés kezdeti szakaszának hossza, és a fenntartó kezelések között eltelt idő megállapítása a felhasználó megfigyeléseire és igényén alapuló döntés kérdése.

Javasolt kezelési idő arckezeléshez

Kezdeti szakasz

A kezelés kezdeti szakaszában (1-8. hét) heti 2-3 kezelés javasolt.

Fenntartó szakasz

Annak érdekében, hogy az elért eredmény fent maradjon, javasoljuk, hogy 3-4 hetente végezzen ismétlődő kezelést. Az ismétlődő kezelések között eltelt idő egyénileg változhat.

Ha azonban a javasolt és szükséges mértéknél gyakrabban használja a készüléket, a hatás nem fog erősödni. Káros bőrreakciók azonban előfordulhatnak a túlzott használat következtében.

A kezelés hatásfoka egyénenként változhat, ezért a kezdeti szakasz hossza, és a fenntartó kezelések között eltelt idő megállapítása a felhasználó megfigyeléseire és igényén alapuló döntés kérdése.

Nem kezelhető testrészek, felületek.

- 1.Száj, ajkak, nemi szervek belső felülete, nyálkahártyák, stb.
- 2.Plasztikai és egyéb műtéti területek
- 3.Ádámcsutka
- 4.Szemgolyó, szemhéj, szemkörnyék
- 5.Fejbőr
- 6.Aknés felület
- 7.Foltok és anyajegyek

- 8.Szemöldök, hajas fejbőr, homlok
- 9.Fülek
- 10.Mellbimbó és bimbóudvar
- 11.Köldök belseje
- 12.Vena cava területe
- 13.Tetovált, festett bőrfelület

*A lista nem teljes. Amennyiben bizonytalan abban, hogy használhatja-e a készüléket, keresse fel orvosát!

Nem alkalmazható az alábbi esetekben

- Ne alkalmazza sebhelyeken és fényérzékeny területeken.
- Égés (napégés is), szőrtüszógyulladás, rosszindulatú daganat, fertőző bőrbetegség fennállása esetén tilos a készülék használata!
- Ne használja, ha visszértágulata vagy értágulata van.
- Ne használja, ha a kezelendő felületen herpes simplex fertőzés, bőrelváltozás, hematoma stb. található.
- Napfény okozta sérülés (napégés) esetén kérjük várja meg, hogy a bőr regenerálódjon. Olyan érzékeny felületeken, mint a nyálkahártyák, a készülék nem alkalmazható.
- Kémiai szőrtelenítés után 30 napot kell várni a kezelés megkezdése előtt
A bőr kifehéřítésére szánt termékek használata után és D-vitamin tartalmú kozmetikumok alkalmazása után használja körültekintően (várjon néhány napot, vagy óvatosan, az 1. fokozaton alkalmazza az IPL készüléket).
- A kezeléssel egyidejűleg ne használjon illóolaj-tartalmú készítményeket!
Győződjön meg róla, hogy a kezelendő felület tiszta és száraz, és nincsenek rajta krém, síkosító, és egyéb kozmetikumok maradványai.
Ha a bőrfelület nem sima, az befolyásolhatja a hatékonyságot, és a készülék sérüléséhez is vezethet.
- Szigorúan tilos a készülék használata bármilyen be nem gyógyult sebbel rendelkező felszínen!
Nem ajánlott hirsutismus jellegű, és egyéb orvosi, főként hormonális hátterű túlzott szőrnövekedés esetén.
Allergiás dermatitis vagy bőrgyulladás esetén kerülje ki az irritált, vagy hólyagos/aknás felületet.
- Aspirin, immunoszuppresszáns-használat, a közelmúltban olyan fényérzékenységet okozó gyógyszerek fogyasztása esetén, mint pl. a tetracyclin, vagy a sulfanilamide.
- Ha a szőrzet vagy a bőr színe alapján nem alkalmas az IPL szőrtelenítés alkalmazására, akkor tilos a készülék használata. Kérjük, ellenőrizze a paramétereit a bőrtónus-kártyán! Szükség esetén kérdezze orvosát!

Lehetséges enyhe mellékhatások

- Enyhe bőrpír, enyhe viszketés és melegérzet a készülék használata közben vagy azt követően jelentkezhet. Ezek ártalmatlan jelenségek, melyek hamarosan megszűnnek.
- Az IPL epilálás után jelentkező bőrreakciók a napozást követően tapasztalható jelenségekhez hasonlóak. Amennyiben ezek a reakciók nem szűnnek meg 48 órán belül, javasolt orvoshoz fordulni.
- A borotválás és a szőrtelenítés együttes hatására bőrszárazság és viszketés jelentkezhet, amely normális reakció. A kellemetlen érzés fokozatosan csökken, de jéggel hűsíthető a kérdéses terület. 24 óra után használhat kíméletes hidratálót is.

Ritkán előforduló komolyabb mellékhatások

- Égés, erős és fájdalmas bőrpír:
Ritka esetben előfordulhat komolyabb bőrpír, amely jelenség többnyire a bőrtónussal hozható összefüggésbe, és a túl magas fényintenzitás okozza.
Amennyiben a reakció nem szűnik meg 3 napon belül, kérjük forduljon orvoshoz!
Feltétlenül várja meg a teljes gyógyulást a következő kezelés előtt, és alkalmazzon alacsonyabb intenzitás fokozatot!
- Bőrgyulladás, fertőzések
Ritkán előfordulnak fertőzések, valószínűsíthetően a borotválkozás okozta sebek vagy a benőtt szőrszálak miatt.
- Erős fájdalom:
Ritkán előfordul erősebb fájdalom, amelynek oka lehet, hogy borotvátlan bőrfelületen alkalmazzák a készüléket, vagy a bőrtípushoz rosszul megválasztott, magas fényintenzitás, vagy ugyanazon felület többszöri egymás utáni vakuzása. Ha nyílt seb, gyulladás, fertőzés, tetoválás vagy égés által érintett bőrfelületet kezelnek vele, az fájdalomhoz vezethet.
A fájdalom jelentkezhet kezelés közben vagy a kezelés után is.

Hibaelhárítás

Amennyiben hibát észlel a készülék használata során, kérjük, előbb vizsgálja meg a lehetséges okokat és megoldásokat az alábbi táblázat segítségével. Amennyiben nem sikerül megoldani a problémát, keresse fel a forgalmazót.

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be.	A hálózati csatlakozó hibás csatlakozása.	Ellenőrizze a csatlakozót, a kábelt és igazítsa meg, vagy csatlakoztassa másik dugaljhoz.
Nincs vakuzás.	A készülék túlmelegedett. A vakuablak túl távol van a bőrtől.	Várja meg, hogy a készülék hűtőrendszere lehűtse a készüléket. Helyezze a készüléket közelebb a bőrhöz, várjon amíg a kék fény villogása megszűnik.
A jelzőfény nem világít.	Hibás készülék.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozást. Ha meggyőződött róla, hogy a csatlakozó megfelelően működik, keresse fel a forgalmazót a garanciális csere miatt.
Szőrtelenítés közben erős fájdalom jelentkezik.	A kezelendő felület borotvátlan.	A készülék használata előtt a kezelendő felület teljes borotválása kötelező. Amennyiben a borotválás allergiás tüneteket vált ki, vágja le a szőrt amilyen rövidre csak lehet, és válasszon egy gyengébb intenzitást.
	A kezelt felület nem epilálható a készülékkel.	Ne használja szeméremajkák, vagina, végbélnyílás, mellbimbó, lámbőudvar, férfiak esetében arc és herezacskó területén!
	Túlzott fényerő. Sérült vakuablak.	Csökkentse a fényintenzitást egy kényelmes beállításra. Keresse fel a forgalmazót.
A kezelt felület kezelés után kipirosodik.	Az enyhe bőrpír ártalmatlan jelenség, amely rövid időn belül elmúlik.	Nincs tennivaló.
Nem elégedett a szőrtelenítés hatáskörével.	Alacsony választott fényintenzitás.	Válasszon magasabb intenzitás-fokozatot.
	Rövid használati idő.	A teljes hatás legalább 8 hét kezelés után látható, heti kétszeri epilálás esetén.
Használat közben a készülék vakuzása leáll.	Az automatikus túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt.	Hagyja kihűlni a készüléket egy jól szellőző helyen. Ellenőrizze a hűtési funkció működését.
Vakuzáskor furcsa szagot érezni.	Koszor szűrő, vagy szőrmaradványok a testfelületen.	Tisztítsa meg a lámpatestet és környékét. Győződjön meg a teljes borotválásról. Állítsa be a megfelelő fényintenzitást.
A készülék és az adapter használat közben felmelegszik.	Ez normális jelenség.	Nincs tennivaló.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Soha ne használja a készüléket vizet tartalmazó fürdőkádban, zuhanyozóban, mosdóban, vagy más víztárolók mellett. A készüléket és a csatlakozót tartsa szárazon.

Ha a készülék megsérül, ne nyúljon a belsejébe az áramütés elkerülése érdekében.

Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a készülékbe, és ne szerelje szét! A rendeltetészerű használat, és a forgalmazón kívüli szétszerelés, szervizelés garanciavesztéshez vezet!

Ne használja a szem környékén. A védőszemüveg általános használat során megvédi a felhasználót, de szem körüli használat esetén a védőszemüveg nem feltétlenül nyel el minden energiát, a rövid távolság miatt a szivárványhártya melanin festékanyaga is elnyelheti az energia egy részét. Ezért javasoljuk, hogy minden használatkor viselje a védőszemüveget. Habár a fény nem hat közvetlenül a szemekre, a magas frekvenciájú villanófény befolyásolhatja a látást.

Ha a hátán szeretné alkalmazni a készüléket, javasoljuk, hogy vegye igénybe egy második személy segítségét, hogy biztonságosan epilálhasson.

Ha a szőrszál hossza meghaladja az 1 mm-t, először borotválja le, lehetőleg kézi borotvapengével.

A szőr elnyeli a hőt a bőrfelületen, ami bőrpírt és duzzanatot okoz, az égő szőr pedig jellegzetes kellemetlen szagot áraszt. Ez hátrányosan befolyásolhatja a termék használati élményét.

Amennyiben a kezelendő bőrfelület nem tiszta és száraz, az kihat az epilálás hatékonyságára, vagy akár a villanás elmaradását, vagy váratlan villanást is okozhat!

Jelenleg nincs adat a 15 év alatti gyermekek való használatot illetően, ezért kérjük, ne alkalmazza 15 év alatti gyermekek kezelésére, és tartsa távol 15 éven alulaktól a készüléket. A kezelést nem végezheti 15 év alatti személy!

A vezeték sérülése esetén keresse fel a forgalmazót. Ne szerelje szét, cserélje ki a készülék és az adapter egyetlen részét sem, mert az garanciavesztéshez vezet, és veszélyes lehet!

Figyelem!

Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajtózza el a készülék rendeltetészerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.

Figyelmeztetések

! Hónaljak kezelése után közvetlenül tilos az izzadásgátlók használata!

! Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a vakunyilást, hogy elkerülje az égési sérüléseket és az üzemzavart.

! A szellőző eltömődése esetén ne használja a készüléket, hogy elkerülje a füstképződést és tűzveszélyt!

! Ne használja háziállatok kezelésére a sérülések elkerülése végett.

! Ne használja a szemkörnyéken a sérülések elkerülése végett!

! Használat után törölje le a szőrt és az esetleges kozmetikumok maradványait a készülékről száraz kendővel, hogy megelőzze az üzemzavart és bőrsérüléseket.

! Ne használja gyermekek közelében, mivel a kibocsátott erős fény káros lehet a szemükre.

! Használat után az enyhe bőrpír és melegérzet normális. Jeges borogatással enyhítheti a bőrreakciót.

! Tűz- és robbanásveszélyes anyagok közelében használni tilos! (spray-k, benzinkút, stb.), mivel fokozza a tűzveszélyt és az áramütés veszélyét.

! Ne irányítsa a vakunyilást fekete tárgyakra, mert ha a készülék meghibásodik, ez veszélyes lehet.

! Ne vakuzzon ruhák, haj és egyéb tárgyak irányába, hogy elkerülje azok feketedését, fakulását és sérülését!

! Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Használat után kérjük, kapcsolja ki!

! Tisztítsa meg a kezelni kívánt bőrfelszínt a szőrszállaktól, olajos szermaradványoktól, és szárítsa meg teljesen!

! Ha a környezeti hőmérséklet-különbség 20 °C-ra emelkedik, kapcsolja ki a készüléket és engedje 2 órán át temperálódni, mielőtt ismét használja.

! A készülék névleges környezeti hőmérséklete 5-40 °C. Kérjük, használat előtt ellenőrizze az aktuális szobahőmérsékletet.

! Kezelés után 24 órán keresztül kerülje a közvetlen UV sugárzást.

! Ha a kezelendő bőrfelület nem száraz és tiszta, az rosszul befolyásolja a kezelés hatékonyságát, akár a vakuzás elmaradását, vagy váratlan vakuzást is okozhat!

! Ne érjen a vakuablakhoz használat után, mert felülete forró lehet, égési sérülést okozhat.

! Ne tegye ki a készüléket hosszú távon közvetlen napfénynek vagy ultraibolya fénynek, mert a készülék komolyan megsérülhet!

!Amennyiben a beépített hűtőventillátor nem kapcsol be a hálózathoz csatlakozáskor (nem zúg), ne használja a készüléket, hogy elkerülje a füst, tűz és egyéb hibajelenségek megjelenését.

!NE használja a készüléket és ne érintse meg vele a sérült, vagy műtéti heges bőrfelületet.

!NE használja a készüléket szépségfolt/anyajegyen, szemölcsön, szőrbenövésen vagy irritált bőrön.

!NE használja a készüléket, ha különösen fényérzékeny.

!NE használja a készüléket, ha az elmúlt 2 hétben napozás által leégett.

!NE használja a készüléket egy ponton napi 3 alkalomnál többször. Az ennél többszöri kezelés bőrrégést vagy sérülést okozhat. Kezelések között tartson legalább 4 óra szünetet!

!NE használja a készüléket ugyanazon a pattanáson két percnél hosszabb ideig. A túlzott használat a bőr sérüléséhez vezethet.

! Az ajánlott kezelési időn túli használat az eszköz felmelegedését okozhatja.

!Ha a készülék használata után a bőr állapotának rosszabbodását (feszés, kellemetlen, irritált, vörös, égő stb. érzés a bőrön), nem kívánt mellékhatást vagy tartós bőrpírt tapasztal, szakítsa meg a készülék használatát és forduljon orvoshoz.

!Soha ne nézzen közvetlenül a fénybe, mert az a szem sérülését okozhatja.

!NE engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak a készülékkel.

!Kellő felügyelet és útmutatás szükséges a készülék biztonságos használatának érdekében, amennyiben azt csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek használják.

!Terhes vagy szoptató kismamák nem használhatják az eszközt.

!Ha fájdalomcsökkentés, a bőr állapota miatt gyógyszert vagy szteroidokat szed, melyek miatt érzékeny a fényre, akkor az eszköz használata fokozhatja ezt az érzékenységet.

!Ne használja a készüléket a szteroidos injekció helyén vagy annak környékén, ha az injekció helye hat hónapnál nem régebbi.

!NE használja a készüléket súlyos akne, csomós vagy tisztás pattanáson, ezeket kerülje ki.

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket a körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát.

A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Leejtés, erős fizikai behatás okozta sérülések, a karbantartás elmulasztása miatti károk (szennyeződések ellenére használat).

Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.