


Használati útmutató

Dr. SONIC

3 fokozatú szájuhany

L-10

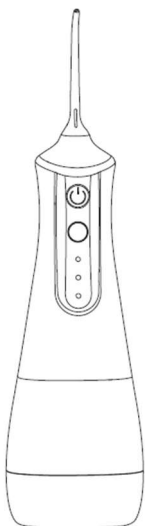

Forgalmazó: E-Hall
kft.
info@e-hall.hu
<https://e-hall.hu/>



Köszönjük, hogy ezt a Dr. Sonic terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetésszerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Kérjük csak rendeltetésszerűen használja a készüléket (szájhygiéniai célra fejlesztett készülék). A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéshez vezet!
- A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és a garancia elvesztésével jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!
- Ne töltsön 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékot a tartályba, hogy elkerülje az égési sérüléseket!
- Ne merítse vízbe a készüléket, mert az tüzet, áramütést, robbanást okozhat.
- Töltés közben véletlen vízbeesés esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből!
- Ne használjon sérült vezetéket vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket!
- Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsen tárolja hőforrás közelében!

EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne nyomja a fúvókát a fogakhoz vagy az ínyéhez erősen, hogy elkerülje a sérülést.
- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon.
- A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítását, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé.
- Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
- Tárolja nem túl meleg, nem túl párás helyen, ne tegye ki intenzív napfénynek.
- Kerülje a meleg, párás helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, kérjük húzza ki a töltőkábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
- Ne használja a készüléket fúvóka nélkül!
- Egyes szájvizek korróziót okozhatnak a készülékben, kérjük kerülje a szájvíz használatát!
- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a szájuhany használatának javallatáról!
- A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza, hogy növelje annak élettartamát.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

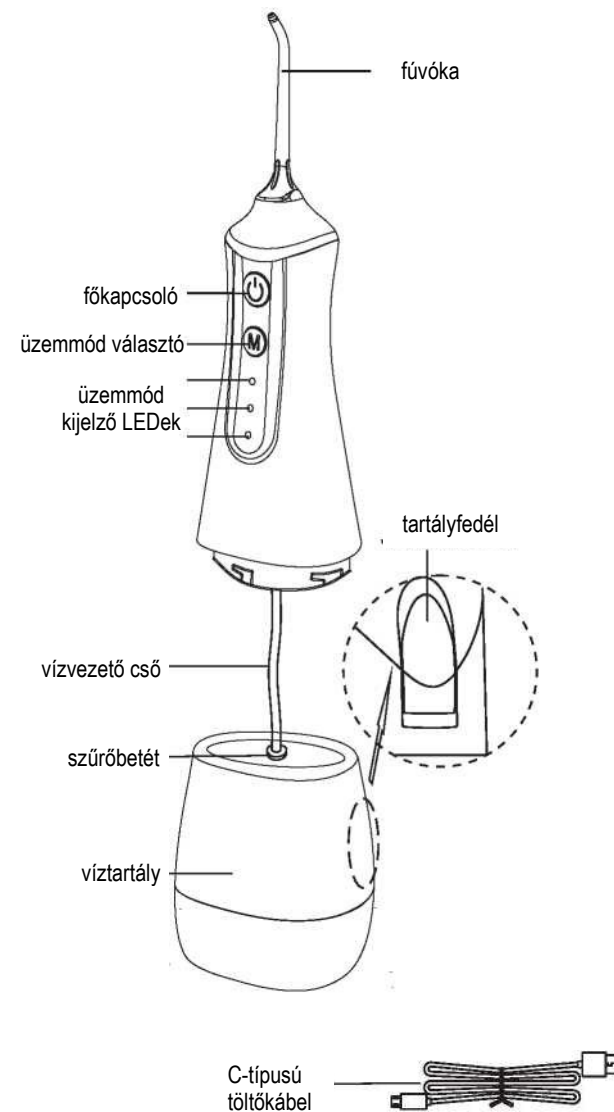

Tartozékok

- Standard fúvóka: napi tisztításhoz, 4 db.
- Nyelvtisztító: Nyelvre tapadt lepedék eltávolítására, 1 db.
- Fogínytasak fúvóka-feltét: speciálisan az íny alatti terület tisztítására, 1 db.
- Fogszabályozó fúvóka feltét: fogszabályozók, pótlások tisztítására, 1 db.
- Fröccsenésgátló fúvóka feltét: megakadályozza a folyadék fröccsenését, 1 db.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használat előtt tölts fel a készüléket az alábbiak szerint.

1. Kezei és a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót egy 5V-os adapterhez (a csomag nem tartalmazza, a legtöbb mobiltelefon-töltő rendelkezik ilyen adapterrel), majd csatlakoztassa a hálózathoz.

2. Nyissa ki a töltőfedelelet, csatlakoztassa az USB-kábel más másik végét a készülékhez, ellenőrizze annak helyzetét.

Javaslatok:

Amennyiben a jelzőfény használat közben vagy után jelez, az akkumulátor merülőben van, kérjük tölts fel a készüléket.

A teljes töltési idő 3-4 óra, ezalatt a jelzőfény villogása jelzi, hogy a töltés folyamatban van. A töltési idő lejártával, a teljes töltés elérésekor a villogás leáll.

A szájuhány használata:

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülék végén lévő nyíláshoz. A fúvóka cseréjéhez kikapcsolt állapotban finoman nyomja meg a kioldógombot.

2. Tölsön vizet a tartályba az alábbi módszerek közül választva:

a. A tartályfedél kinyitása után tartsa vízszintesen a készüléket, és öntsön bele vizet, majd zárja be a fedelet.

b. Forgassa el a tartályt, hogy szét tudja tekerni a tartályt és a készüléktestet. Tartsa függőlegesen a tartályt, tölts fel, majd tekerje vissza a testre.







3. Válassza ki a kívánt üzemmódot az M gomb megnyomásával. Az üzemmódot működés közben is átállíthatja az M gomb segítségével.

Az alábbi üzemmódok közül választhat:

Clean: Mélytisztítás, gyors tisztítás.

Pulse: Finoman masszírozza a fogínyt, amellyel serkenti a vérkeringést, így egészségesebbé teheti a fogínyt. Ugyanakkor alkalmas érzékeny fogakhoz is. Ha először használja a készüléket, javasoljuk, hogy ezt a beállítást válassza! Ha Önnek inkább a kíméletesség fontos, nem a mély tisztítás, ezt a beállítást javasoljuk.

Surf: Szaggatott erősebb kifújás, a fogínyek egyesével való masszírozására, pontról-pontra haladva precíz és alapos tisztításra javasoljuk használatát.

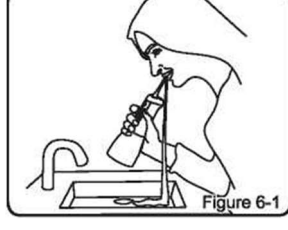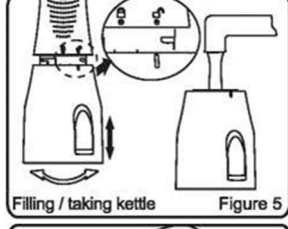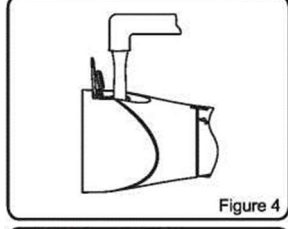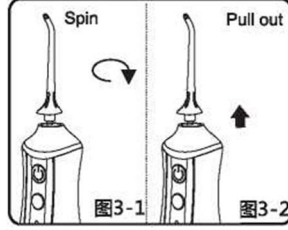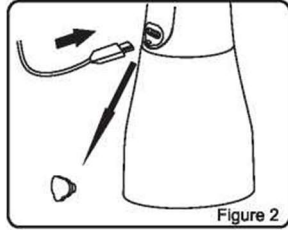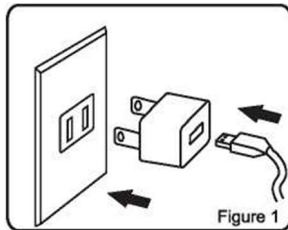

Tipp:

Fogászok javaslatára kezdők számára az első héten a Pulse üzemmód alkalmazása javasolt, majd a továbbiakban, ha megszokta a szájuhány használatát, próbáljon ki más üzemmódokat is.

4. Használat előtt tartsa függőlegesen a szájuhányt, majd helyezze a fúvókát a szájába, illesse a fogakhoz vagy az ínyhez, és nyissa ki a száját résznyire, hogy a folyadék távozhasson.

5. Csak ezután nyomja meg a bekapcsológombot (így nem fröcsköli össze magát és környezetét). Használat közben az alábbiakra fordítson különös figyelmet:

- a. A vízszög derékszöget kell, hogy bezárjon a fogakkal vagy az ínnyel;
- b. Haladjon lassan végig a fogsorán, hogy minden fogat és a fogközöket is megfelelően megtisztítsa;
- c. A fúvóka illeszkedjen az íny széléhez, és legyen párhuzamos az ínnyel;

Tippék:

Ne irányítsa a vízszögat közvetlenül a fogínytasakokba!

Használat után nyomja meg a főkapcsolót a kikapcsoláshoz. A beépített időzítő 2 perc után automatikusan kikapcsolja a készüléket, de a főkapcsoló megnyomásával újraindíthatja.

Használat utáni teendők:

1. Ürítse ki a víztartályt.
2. A főkapcsolóval ürítse ki a benne maradt folyadékot.
3. Kapcsolja ki a készüléket, zárja be a tartályfedelelet.
4. Törölje szárazra a szájuhányt.

Tippeink:






A vízmaradék kiürítésével elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, akkor száradás után tisztítsa meg az alábbiak szerint.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel, vagy semleges tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő hatású anyagokat, mert azok károsíthatják a készüléket. Ne használjon 50 °C-nál melegebb hőmérsékletű vizet a tisztításhoz.

A készülék tisztítása:

- Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa meg a készülék testét.

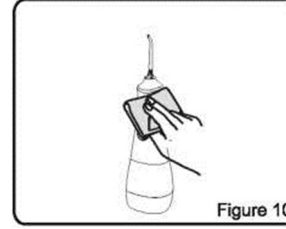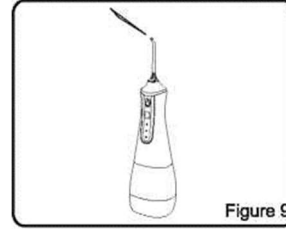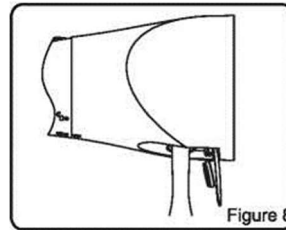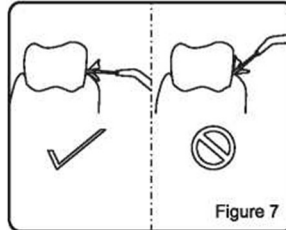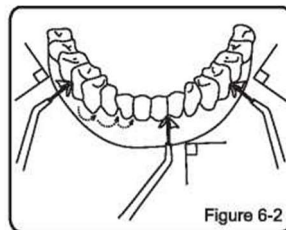

- Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!

A víztartály tisztítása:

- A tartály száraz vagy nedves kendővel tisztítható, vagy a főegységről leválasztva tiszta vízzel előlítható.
- Ha sokáig nem használja a készüléket, kérjük, tisztítsa meg a tartály belsejét.

A fúvóka tisztítása:

- Száraz vagy nedves ruhával tisztítható, vagy a készülékről leválasztva tiszta vízzel öblítható, majd szárazra törölhető.
- Ne hajlítsa, húzza, csavarja a fúvókát.
- Fogorvosok javaslatára ajánlott a fúvókát félévente cserélni.

HIBAELHÁRÍTÁS

hibajelenség	lehetséges okok	megoldás
A készülék leáll.	Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat.	Tölts fel 3 óránál hosszabb idő alatt.
Alacsony víznyomás, vagy nincs vízszög.	Fúvóka-eltömődés.	Cserélje le a fúvókát.
	A szűrő eltömődött.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Üresen működött.	Távolítsa el és öblítse át a fúvókát. Tölts fel a tartályt, majd vízszintesen tartva kapcsolja be a készüléket.
Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható.	Az akkumulátor elöregedett.	Keresse fel a forgalmazót.
	Elégtelen töltési idő.	Tölts több, mint 3 órán keresztül.
A töltés-kijelző nem működik.	Nincs áram alatt a készülék.	Igazítsa meg/cserélje ki a töltő adapter és/vagy kábelt
	Töltési áramkör hiba.	Keresse fel a forgalmazót.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát.

A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használat miatt.

Elállás a termék kibontását követően higiéniai okokból nem lehetséges!