

## Használati útmutató

# Dr. SONIC

## Szónikus elektromos fogkefe

### 5 funkciós, IPx7 vízálló

D7



Forgalmazó: E-Hall kft.  
[info@e-hall.hu](mailto:info@e-hall.hu)  
<https://e-hall.hu/>



Köszönjük, hogy ezt a Dr. Sonic terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.


#### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetésszerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Kérjük csak rendeltetésszerűen használja a készüléket (szájhygiéniai célra fejlesztett készülék). A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéshez vezet!
- A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és garanciaszáttal jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!
- Töltés közbeni véletlen vízbeesés esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből!
- Ne használjon sérült vezetékelt vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket!
- Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsen vagy tárolja hőforrás közelében!

#### EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon.
- A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítását, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé!
- Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
- Tárolja nem túl meleg, nem túl párás helyen, ne tegye ki erős napfénynek.
- Kerülje a meleg, párás helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket sokáig nem használja, húzza ki a kábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Komoly fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a készülék használatának javallatáról!
- A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza!
- Kerülje a készülék hosszú ideig történő vízbe merítését.
- Forduljon fogorvosához, ha a fogkefe használata során túlzott vérzés jelentkezik.
- Ne használja tovább a fogkefefejet, ha a sörték törtek vagy hajlottak.

#### A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

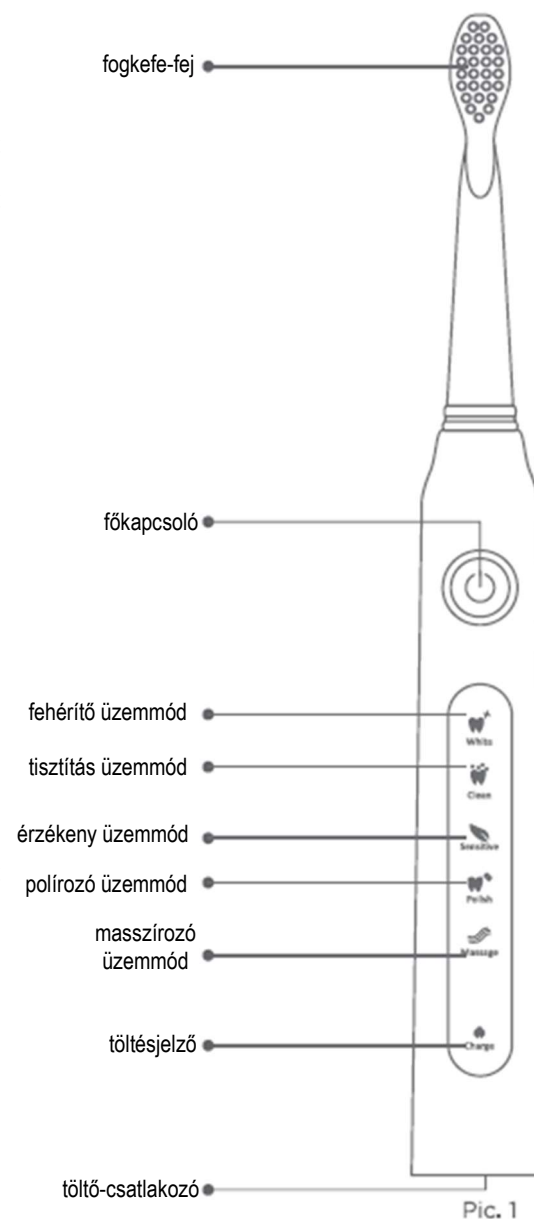

## A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

- Szónikus vibráció, 40 000 mikrozegés percenként, dinamikus tisztítás
- 5 fogmosási funkció:
  - ✓ mélytisztító üzemmód
  - ✓ mindennapi üzemmód
  - ✓ érzékeny üzemmód
  - ✓ fogfehérítő üzemmód
  - ✓ masszázs üzemmód
- Egyedi kialakítású sörték, amelyek pontosan követik az egyes fogak felületét az így és a nehezen elérhető területek alapos tisztításához.
- 2 perces intelligens időzítő 30 másodpercenkénti rezgésszünettel.
- Cserélhető fogkefefejek.
- Vízbekatolás elleni védelem mértéke: IPx7
- USB töltés, egyszerű és kényelmes; otthoni vagy utazás közbeni használatra.
- Hosszú élettartamú akkumulátor, egyszeri töltés akár 30 napos üzemi időt biztosít

## SPECIFIKÁCIÓK

Áramforrás: DC3.7V

A fogkefe anyaga: ABS/TPPE

Sörte: műanyag

Fogyasztás: 1.0W

Működési hőmérséklet: 0-50°C

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Töltés

Használat előtt tölts fel a készüléket az alábbiak szerint.

1. Keze, a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót 5V-os adapterhez (a csomag nem tartalmazza, a legtöbb mobiltelefon-töltő rendelkezik ilyen adapterrel), és csatlakoztassa a hálózathoz.

2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék alján található töltőnyíláshoz. A töltésjelző lámpa világít. (Az első használat alkalmával vagy ha hosszabb ideig nem használja, normális, hogy a jelzőfény kezdetben 5 percig nem világít.)


### Javaslatok:

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a töltésjelző lámpa 10-szer felvillan, emlékeztetve a töltésre.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény automatikusan kialszik, és a töltőegység automatikusan kikapcsol a túltöltés elkerülése érdekében.

### A fogkefefeje cseréje

Nyomja a fogkefefejet a markolatra úgy, hogy a sörték a gomb és kijelző felé nézzenek, és az A illeszkedik T-vel. Kioldáshoz előbb csavarja el a fejet, majd válassza le a markolatról.

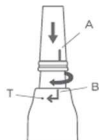

### Az üzemmód kiválasztása

Válassza ki az Önnek tetsző fogmosási funkciót a „ϕ” gomb megnyomásával. 5 fogmosási funkció közül választhat: mélytisztító üzemmód, mindennapos üzemmód, érzékeny üzemmód, fogfehérítő üzemmód, masszázs üzemmód. A funkciók közötti váltáshoz ismételten nyomja meg a „ϕ” gombot.

Nedvesítse meg a sörtéket és tegyen kis mennyiségű fogkrémet a sörtékre. Hogy elkerülje a fogkrém fröccsenését, csak ezután kapcsolja be a fogkefét, hogy azt a szájába helyezte.

Helyezze a fogkefe sörtéit a fogához úgy, hogy az kissé a fogíny széle felé dőljön.

A ϕ gombbal kapcsolja be a készüléket. Óvatosan tartsa a sörtéket a fogakon és a fogíny peremén. Mosson fogat a fogkefefeje finom előre-hátra mozgásával, hogy a sörték a fogak közé is bejussanak. ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fogakra, és ne alkalmazza a sörtéket egy adott területen hosszú ideig.

A fogorvosok ajánlása szerint a fogmosást 2 percen át kell végezni, amelyben a szájüreg minden könegyedére 30 másodperc jut.

Ha érzi a rezgésszünetet, lépjen a következő területre. A fogkefe 2 perc után automatikusan kikapcsol.

A fogmosási ciklus befejezése után további időt fordíthat a fogak rágó felületeinek és a foltos felületek mosására a ϕ gomb megnyomásával.

### Tippek:

Kezdők számára az első szónikus fogkefe-használat során szokatlan érzékenység jelentkezhet, amely normális jelenség, néhány használat után elmúlik. Amennyiben ez továbbra is fennmarad, vagy erős fájdalmat érez, keresse fel fogorvosát és függessze fel a fogkefe használatát!

Fogorvosok javallatára kezdő szónikus fogkefe-használók először a Sensitive módot alkalmazzák, majd, ha azt megszokták, próbáljanak ki más üzemmódokat is.

A szónikus fogkefe intenzív sörtemozgása erős habzást okoz, ezért kevesebb fogkrém használata javasolt, a normál fogkefékhez viszonyítva.

## A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő anyagokat, vagy 50 °C-nál melegebb vizet!

**Ne tisztítsa a fogkefefejet, és a fogkefe markolatot mosogatógépekben!**

Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa a készülék testét.

Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!

Háromhavonta cserélje a fogkefefejet. Amennyiben a kopás jelei mutatkoznak, hamarabb cserélje a fejet. Csak a gyártó által ajánlott fogkefefejeje használja a készüléket. A fogkefefejek elérhetőségéről érdeklődjön a forgalmazónál!

## HIBAEHÁRÍTÁS

| hibajelenség   | lehetséges okok  | megoldás  |
|--|--|---|
| A készülék leáll.  | Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat. | Töltse fel 3 óránál hosszabb idő alatt.                 |
| Rossz hatékonyság.   | A fogkefefeje elöregedett, elkopott.   | Cserélje le a fogkefefejet.                             |
| Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható. | Az akkumulátor elöregedett.  | Keresse fel a forgalmazót.                              |
|  | Elégtelen töltési idő.   | Töltse több, mint 3 órán keresztül.                     |
| A töltés-kijelző nem működik.                              | Nincs áram alatt a készülék.   | Igazítsa meg/cserélje ki a töltő adapter és/vagy kábelt |
|  | Töltési áramkör hiba.  | Keresse fel a forgalmazót.                              |

## ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

## GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket a körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát.

A következő feltételek garanciavesztéshez vezetnek:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használat miatt.

**Elállás a termék kibontását követően higiéniai okból nem lehetséges.**