



Forgalmazó: E-Hall Kft.

e-hall.hu

Használati útmutató


IPL szőrtelenítő készülék

BHRL-02

Ez a készülék a villanófényes (IPL) szőrtelenítés módszerét alkalmazza. Ez a módszer kiváló eredményeket ért el a szőrnövekedés gátlásában, ezért lett népszerű a szépségszalonok körében. Ma már otthonában is használhat IPL elven működő szőrtelenítő eszközt.

Az IPL módszer

Az IPL készülék erős fényimpulzust bocsát ki a bőrfelületre, ahol a pigmentanyagként funkcionáló melanin elnyeli azt, amely hő keletkezésével jár. A sötétebb részek, vagyis a szőrszálak tehát hőhatásnak vannak kitéve, míg a világosabb bőr nem nyeli el a fényt. A szőrszálak a keletkezett hőt elvezetik a szőrtüszőbe, amely idővel elengedi a szőrszálát, és megszűnik szőrtüszőként funkcionálni.

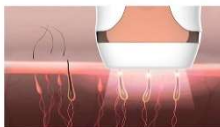

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja fürdés közben, ne tisztítsa vízben, a készülék nem mosható! Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a konnektorból, ne nyúljon utána! Soha ne működtesse a készüléket, ha annak kábele, adaptere sérült, ha nem működik megfelelően, vagy ha sérült vagy vízbe esett. Ne hagyja őrízetlenül, amíg az eszköz feszültség alatt van. A készüléket a használatára vonatkozó tudással vagy tapasztalattal nem rendelkező, csökkent szellemi, fizikai képességű vagy érzékelésű személyek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják, tarthatják karban, azt követően, hogy a felnőttől megkapták a megfelelő utasításokat! A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt megtisztítaná vagy eltenné. Kizárólag eredeti tartozékokat használjon a készülék karbantartása vagy javítása során! Ne vágja el az adapter vezetékét annak cseréje céljából, balesetveszélyes! Sérült UV-szűrő és fény-kibocsátó ablak esetén ne használja a készüléket! **MINDIG HASZNÁLJA A VÉDŐSZEMÜVEGET KEZELÉSKOR!**

A készülék használata TILOS:

- Gyermek számára nem alkalmazható a készülék.
- Ha a bőre soha vagy csak nagyon ritkán ég le, vagy nagyon sötét a bőrtónusa, akkor ne használja a készüléket!
- Terhesség és szoptatás alatt használata tilos, mivel a készüléket nem tesztelték terhes és szoptató nőknél.
- Bőrbetegség fennállása esetén a készülék használata nem javasolt, továbbá bőrrák elleni kezelés alatt, vagy ha Önnek több atipikus anyajegye van.
- Fényérzékeny, fényallergiás bőr esetén ne használja a készüléket!
- 3 héten belüli műtét esetén a beavatkozás területén ne használja!
- Cukorbetegség, lupusz, porphyria, vagy pangásos szívbetegek esetén használata ellenjavallt.
- Anyajegyek, szeplők, tágult vénák, sötét pigmentfoltok, bizonyos sebhelyek, bőrrendellenességek esetében konzultáljon orvosával!

- Ne használja leégett bőrfelületen, ha éppen napozott, vagy barnítókrém használta.
- Ne használja olyan felületen, amely tetoválással fedett, gyulladt, ekcémás, psoriasis található rajta, napégés, szőrtüsző-gyulladás, zúzódás, hámsérülés található rajta. Tilos továbbá Herpes Simplex vírus által érintett felületeken, sérülés vagy bőrbetegség által érintett felületeken használni a készüléket!

A készülék bemutatása

A BHRL02 készülék meghatározott felületen hiperspektrális, nem-folytonos fényt kibocsátó fényforrásokat tartalmaz. Ezek a fényforrások fényimpulzusokat bocsátanak ki a bőrfelszínre, amelyek energiáját a szőrtüszők elnyelik. Sötét szőrzet esetén erősebb az elnyelés. A fényimpulzus energiája a szőrtüszőket nyugalmi fázisba kényszeríti. Ezáltal a szőrszálak meggyengülnek és kihullanak, amely sima bőrfelületet eredményez.

Ez a készülék életciklusa alatt 999 900 villanásra képes, nem szükséges a fejegységet cserélni. A kezelési felület 3 cm², a kezelés így gyorsan kivitelezhető.

A BHRL02 készülék felépítése



Tápfeszültség:	DC12V/3A	Tárolási hőmérséklet:	0°C-40°C
Bemeneti teljesítmény:	36W	Működési hőmérséklet:	5°C-35°C
Kimeneti fényenergia:	3 J/cm ²	Megengedett pártartalom:	30%-85%
Villanások száma:	999 900	Kezelt felület/villanás:	3 cm ²

A készlet tartalma:

- IPL szőrtelenítő készülék
- Hálózati adapter
- Védőszemüveg
- Borotva
- Használati útmutató

Köszönjük, hogy a BHRL02 készüléket választotta!

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a tájékoztatót és őrizze meg későbbi használatra!

A készülék használata előtt

Az IPL szőrtelenítővel történő kezelés előtt szükséges eltávolítani a szőrszálakat a kezelni kívánt területen. Erre azért van szükség, hogy a szőrszálak bőrfelszín alatt elhelyezkedő részei nyeljék el a fényt a hatékony kezelés érdekében. Az előkezelés végezhető borotválással, trimmeléssel, epilátorral vagy gyantázással. Kerülje a szőrtelenítő rémek használatát, mert azok káros hatással lehetnek a bőrre. Gyantázás után érdemes 24 órát várni az IPL szőrtelenítés előtt, hogy regenerálódjon a bőr. Kezelés előtt zuhanyozzon le, hogy minden gyantamaradékot eltávolítson a bőrről!

Az IPL kezelés megkezdése előtt tehát:

1. Távolítsa el a szőrszálakat a kezelendő felületről.
2. Tisztítsa meg a bőrt a szőrszálaktól és olajos, kémiai anyagoktól, majd teljesen szárítsa meg.
3. Ajánlatos a kisebb anyagjegyek kerülése, világos ceruzával színezése.

A készülék használata

1. Tisztítsa meg és szőrtelenítse a kezelendő bőrfelületet.
2. Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. Megjelenik a képernyőn az OFF felirat.
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a be/ki gombot. A kijelzőn megjelenik a maradék villanások száma, a kibocsátott fényerőt jelző sáv és a ventilátor működését jelző ikon. Bekapcsoláskor alapbeállításként a leggyengébb fényerő látható, amelyet a be/ki gomb rövid megnyomásával növelhet az 5. fokozatig. Ha csökkenteni kívánja a fényerőt, ezt ismét a be/ki gomb rövid megnyomásával teheti meg.
4. **Használja a védőszemüveget!** Helyezze a bőrfelületre 90°-os szögben a fejezséget, és nyomja meg röviden az arany színű gombot a fénykibocsátáshoz.
 - a. Bekapcsoláskor a készülék manuális villantás módban van, csak az arany színű gomb megnyomásakor villant. Minden villantáskor eggyel csökken a kijelzőn látható szám.
 - b. Automatikus villanás mód: bekapcsolás után, NEM a bőrre helyezett készüléken az arany színű gomb segítségével állíthatja be az automatikus üzemmódot. Az automatikus beállítást a kijelzőn 3 négyzet jelzi. Automatikus üzemmódban a készülék minden 2-3 másodpercben villant egyet, amíg a bőrfelülettel érintkezik a fejezség.
5. Kikapcsoláshoz nyomja meg a be/ki gombot 2-3 másodpercig, ekkor a képernyőn visszazámlás jelenik meg 10-től, majd a készülék kikapcsol.

Javasolt beállítások

Első használat alkalmával javasoljuk, hogy a leggyengébb, 1-es fokozatot használja! A további kezeléseknél használható beállítás egyéni tulajdonságoktól függ. Pigmentált bőr esetén erősebb hőérzet alakulhat ki, a fehérebb bőrűek bőre kevesebb melanint tartalmaz, így bőrük kevésbé melegszik fel a kezelés hatására. A szőrszál színe hasonlóképpen, minél sötétebb, annál hatékonyabban veszi fel a hőt. **Kérjük, hogy nagyon sötét bőr, és szőke, vörös vagy ősz szőrszín esetén használjon más szőrtelenítési módszert!**



A továbbiakban úgy járjon el, hogy a vékonyabb, érzékenyebb bőrfelületeken alacsonyabb fokozatot alkalmazzon, és fokozatosan emelje az intenzitást. Erős hő vagy fájdalomérzet esetén pedig csökkentse az intenzitás értékét.

Például a hónalj, bikinivonal és az arc területén a legalacsonyabb okozatról indulva növelje addig az intenzitást, amíg elkezd érezni a hatást. Ekkor elérte a kívánt szintet, amelyet a kezelés előrehaladtával (néhány hét múlva) ismét megpróbálhat növelni. Ha azonban a későbbi kezelések során erősebb hő- és fájdalomérzet társul a kezeléshez, csökkentse a beállítást! A kar és a lábak területén akár 4-5 szintű intenzitás is alkalmazható, az érzékeny területekre általában a 2-3-4 beállítás elegendő.

Kezelési időtartam és gyakoriság

- Az első 1-3 héten heti 2-3 kezelésre van szükség, ekkor valószínűleg még nem tapasztalunk látható eredményt.
- A 4-5. héten heti 2-3 kezelés mellett már látható a ritkulás, a szőrszálak gyengülni kezdenek.
- A 6.-8. héten heti 2 kezelés esetében látványosan ritkulnak a szőrszálak, és erősen gyengül a minőségük.
- 8 hét után elérhetjük a sima bőr élményét, amelynek érdekében elegendő alkalmanként végeznünk kezelést.

Gyakori bőrreakciók

Az IPL kezelés hatására a bőr kipirosodhat, bizsergést, melegérzetet tapasztalhatunk. Ezek a reakciók teljesen ártalmatlanok és rövid időn belül elmúlnak. A borotválás és IPL kezelés hatására viszkető, száraz bőrt tapasztalhatunk, melyre a jelelés és a hidratálás a megoldás.

A készülék karbantartása

1. A lámpatestet és az ablakot óvatosan tisztítsa meg!
2. A készüléket folyadékoktól távol tartsa és használja!
3. Használat után kapcsolja ki, húzza ki az adaptert a konnektorból, és hagyja kihűlni.
4. A kihűlt készüléket enyhén nedves ruhával lehet tisztítani, de tilos bármilyen vegyszer használata!
5. Tisztítás után szárítsa meg teljesen!
6. Tartsa 0°C és 60°C közötti hőmérsékleten, portól és párától védett helyen!

Hibaelhárítás

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A készülék és az adapter felmelegszik használat közben.	Normális jelenség.	Nincs teendő.

A bőrre irányítva nem villan a készülék, de a ventilátor működik.	Túlmelegedés-védelem aktiválódott.	Ne kapcsolja ki a készüléket, a ventilátor kb. 15 perc alatt lehűti, ekkor újra használhatja.
Az arany színű gomb megnyomására nem villant a készülék.	Újraindítás szükséges.	Kapcsolja ki és kapcsolja be a készüléket.
Nem lehet állítani a fényerőt.	Újraindítás szükséges.	Kapcsolja ki és kapcsolja be a készüléket.
Használat közben furcsa szagot érezni a készülékből.	A készülék egyes részei szennyezettek. Nem teljesen szőrtelenített a kezelendő felület.	Óvatosan tisztítsa meg a készülék bőrrel érintkező részzeit. A hosszabb szőrszálak égése okozhat szagot, kérjük szőrtelenítse a kezelendő felületet.
Kezelés közben erős fájdalom a bőrben.	Túl erős fényintenzitás. Nem teljesen szőrtelenített a kezelendő felület. Az UV-szűrő nyílása sérült.	Ellenőrizze a helyes beállítást! Kérjük szőrtelenítse a kezelendő felületet. Az UV-szűrő sérülése esetén ne használja tovább a készüléket!
Kezelés után az átlagosnál hosszabb ideig tartó bőrreakciók.	Túl erős fényintenzitás. Túl gyenge fényerő. Nem megfelelő pozicionálás. Késői IPL-reakció.	Használjon alacsonyabb beállítást! Használjon magasabb intenzitást! Irányítsa pontosan a kezelni kívánt bőrfelületre a készüléket. Legalább 6 hónapig tartó használat során csökkenni fog a reakció.

Garancia

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális javítás igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló igazolást (vásárlási számla).

A következő feltételeket nem tartalmazza a garancia:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, például a tápegység nem megfelelő használatából, nem megfelelő aljzatba dugva okozta sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy helytelen használata miatt.

Kedves Vásárlónk!

Kérjük, értékelje termékünket, ezzel is segítve munkánkat!

