


Használati útmutató

Dr. SONIC

Nagy kijelzős szájuhany

5 működési móddal

L-12

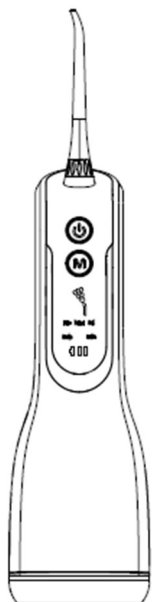

Forgalmazó: E-Hall kft.
info@e-hall.hu
<https://e-hall.hu/>



Köszönjük, hogy ezt a Dr. Sonic terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása a sérülések elkerülése érdekében. Kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetésszerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Szájhygiéniai célra fejlesztett készülék. A nem rendeltetésszerű használat garanciavesztéshez vezet!
- A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és a garancia elvesztésével jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!
- Ne töltsön 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékot a tartályba, hogy elkerülje az égési sérüléseket!
- Ne merítse vízbe, mert az tüzet, áramütést, robbanást okozhat.
- Töltés közbeni véletlen vízbejutás esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből!
- Ne használjon sérült vezetékelt vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket!
- Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsön vagy tárolja hőforrás közelében!

EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne nyomja a fúvókát a fogakhoz vagy az ínyéhez erősen, hogy elkerülje a sérülést.
- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon.
- A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítását, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé.
- Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
- Tárolja nem túl meleg, nem túl párás helyen, ne tegye ki erős napfénynek.
- Kerülje a meleg, párás helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket sokáig nem használja, húzza ki a kábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
- Ne használja a készüléket fúvóka nélkül!
- Egyes szájvizek korróziót okozhatnak a készülékben, kérjük kerülje a szájvíz használatát!
- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a szájuhany használatának javallatáról!
- A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza!

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

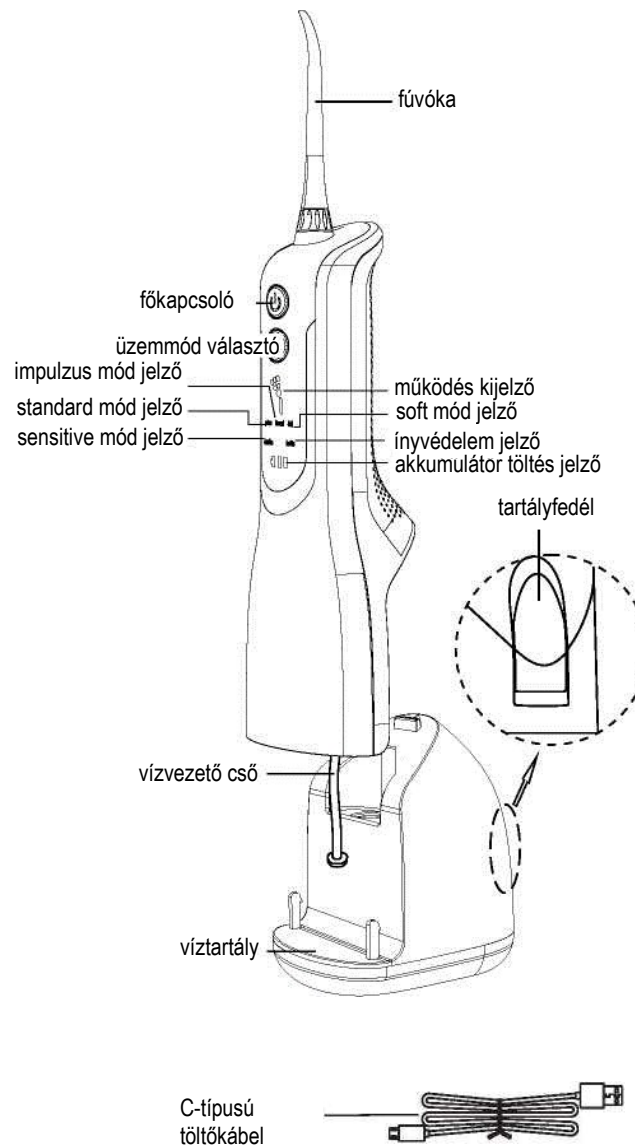

Tartozékok

Standard fúvóka: napi tisztításhoz.

Nyelvtisztító: Nyelvre tapadt lepedék eltávolítására.

Fogínytasak fúvóka: speciálisan az íny alatti terület tisztítására.

Fogszabályozó fúvóka: fogszabályozók, pótlások tisztítására.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használat előtt töltsse fel a készüléket az alábbiak szerint.

1. Kezei és a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót egy 5V-os adapterhez (a csomag nem tartalmazza, a legtöbb mobiltelefon-töltő rendelkezik ilyen adapterrel), majd csatlakoztassa a hálózathoz.

2. Nyissa ki a töltőfedelelet, csatlakoztassa az USB-kábel más másik végét a készülékhez, ellenőrizze annak helyzetét.

Javaslatok:

Amennyiben a jelzőfény jelez, az akkumulátor merülőben van, kérjük töltsse fel a készüléket.

A teljes töltési idő 3-4 óra, ezalatt a fény jelzi, hol tart a töltési folyamat. A teljes töltés elérésével a villogás leáll.

A szájuhany használata:

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülék végén lévő nyíláshoz. A fúvóka cseréjéhez kikapcsolt állapotban finoman nyomja meg a kioldógombot.

2. Töltsön vizet a tartályba az alábbi módszerek közül választva:

a. A tartályfedél kinyitása után tartsa vízszintesen a készüléket, és öntsön bele vizet, majd zárja be a fedelet.

b. Forgassa el a tartályt, hogy szét tudja tekerni a tartályt és a készüléktestet. Tartsa függőlegesen a tartályt, töltsse fel, majd tekerje vissza a testre.

3. Válassza ki a kívánt üzemmódot az M gomb megnyomásával. Az üzemmódot működés közben is átállíthatja az M gomb segítségével.

Az alábbi üzemmódok közül választhat:

Pulse: Váltakozó erősségű vízszugár: mélytisztítás, az íny masszírozása.

Normal: Folyamatos, közepes erősségű vízszugár, a hatékony napi tisztításhoz.

Soft: Gyengéd, kíméletes vízszugár, érzékeny fogak és íny tisztítására.

Sensitive: A legenyhébb, kímélő fokozat, extra érzékeny fogak és kezdő felhasználók számára.

Burst fire: Pontos, precíz vízszugár, elsősorban fogszabályozó tisztítására.

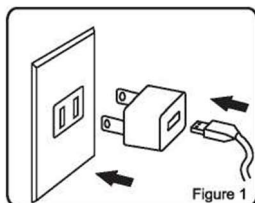


Figure 1

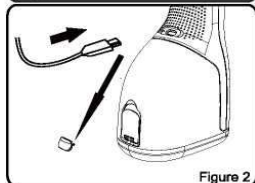


Figure 2

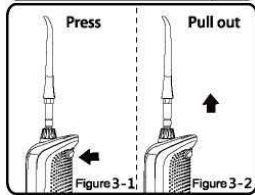


Figure 3-1

Figure 3-2


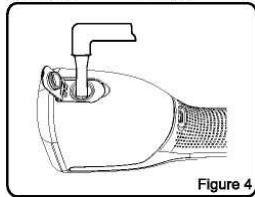


Figure 4

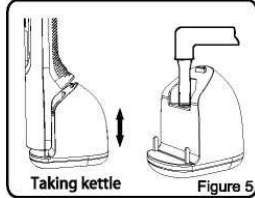

Taking kettle

Figure 5

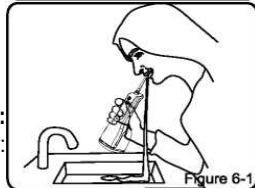


Figure 6-1

Tipp:

Fogászok javaslatára kezdők számára az első héten a Sensitive üzemmód alkalmazása javasolt, majd amikor megszokta a szájuhany használatát, próbáljon ki más üzemmódokat is.

4. Használat előtt tartsa függőlegesen a szájuhanyt, majd helyezze a fúvókát a szájába, illessze a fogakhoz vagy az ínyhez, és nyissa ki a száját résnyire, hogy a folyadék távozhasson.

5. Csak ezután nyomja meg a bekapcsológombot (így nem fröcsköli össze magát és környezetét). Használat közben az alábbiakra fordítson figyelmet:

- A vízszugár derékszöget kell, hogy bezárjon a fogakkal vagy az ínyvel;
- Haladjon lassan végig a fogsorán, hogy minden fogat és a fogközöket is megfelelően megtisztítsa;
- A fúvóka illeszkedjen az íny széléhez, és legyen párhuzamos az ínyvel;

Tipp:

Ne irányítsa a vízszugarat közvetlenül a fogínytasakokba!

Használat után nyomja meg a főkapcsolót a kikapcsoláshoz. A beépített időzítő 2 perc után automatikusan kikapcsolja a készüléket, de manuálisan újraindítható.

Használat utáni teendők:

- Ürítse ki a víztartályt.
- A főkapcsolóval ürítse ki a bennmaradt folyadékot.
- Kapcsolja ki a készüléket, zárja be a tartályfedelelet.
- Törölje szárazra a szájuhanyt.

Tipp:

A vízmaradék kiürítésével elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Ha sokáig nem használja a készüléket, száradás után tisztítsa meg.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerrel tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő anyagokat, azok károsíthatják a készüléket. Ne használjon 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet a tisztításhoz.

A készüléktest tisztítása:

- Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa a készülék testét.
- Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!

A víztartály tisztítása:

- A tartály száraz vagy nedves kendővel tisztítható, vagy a főegységről

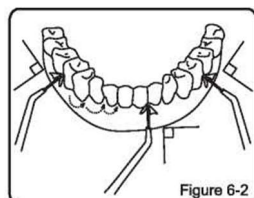


Figure 6-2

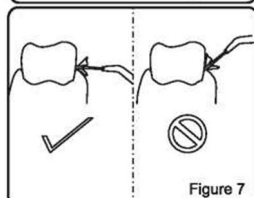


Figure 7

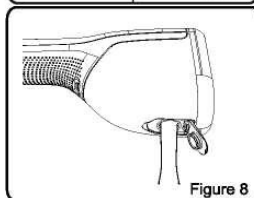


Figure 8



Figure 9

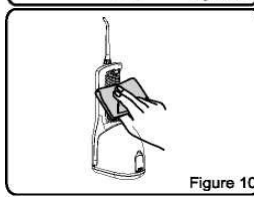


Figure 10

leválasztva tiszta vízzel előblítható.

- Ha sokáig nem használja a készüléket, tisztítsa meg a tartály belsejét.

A fúvóka tisztítása:

- Száraz vagy nedves ruhával tisztítható, vagy a készülékről leválasztva tiszta vízzel öblítható, majd szárazra törölhető.
- Ne hajlítsa, húzza, csavarja a fúvókát.
- Fogorvosok javaslatára ajánlott a fúvókát félévente cserélni.

HIBAELEHÁRÍTÁS

hibajelenség	lehetséges okok	megoldás
A készülék leáll.	Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat.	Töltse fel 3 óránál hosszabb idő alatt.
Alacsony víznyomás, vagy nincs vízszugár.	Fúvóka-eltömődés.	Cserélje le a fúvókát.
	A szűrő eltömődött.	Tisztítsa ki a szűrőt.
Üresen működött.	Távolítsa el és öblítse át a fúvókát.	Töltse fel a tartályt, majd vízszintesen tartva kapcsolja be a készüléket.
		Keresse fel a forgalmazót.
Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható.	Az akkumulátor elöregedett.	Töltse több, mint 3 órán keresztül.
	Elégtelen töltési idő.	Töltse meg/cserélje ki a töltő adapter és/vagy
A töltés-kijelző nem működik.	Nincs áram alatt a készülék.	Keresse fel a forgalmazót.
	Töltési áramkör hiba.	

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén az alkatrészeket vagy a teljes terméket az adott körülményeknek megfelelően kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát.

A következő feltételek garanciavesztéshez vezetnek:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. a tápegység vagy aljzat nem megfelelő használata okozta sérülések stb.

Normál használat okozta öregedés és elhasználódás.

Amennyiben problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

Elállás a termék kibontását követően higiéniai okból nem lehetséges.