

Használati útmutató

Összecsukható szájhugany

L-13



Forgalmazó: Spalazzomed Kft.
spalazzomed@spalazzomed.hu
spalazzomed.hu

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.


BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetészerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Kérjük csak rendeltetészerűen használja a készüléket (szájhygiéniai célra fejlesztett készülék). A nem rendeltetészerű használat garanciavesztéshez vezet! • A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és garanciaszáttal jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval! • Ne töltsön 40 °C feletti hőmérsékletű folyadékot a tartályba, hogy elkerülje az égési sérüléseket! • Ne merítse vízbe a készüléket, az tüzet, áramütést, robbanást okozhat. • Töltés közbeni véletlen vízbeejtés esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből! • Ne használjon sérült vezetékelt vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket! • Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsse vagy tárolja hőforrás közelében!

EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne nyomja a fúvókát a fogakhoz vagy az ínyéhez erősen, hogy elkerülje a sérülést.
- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.
- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon.
- A töltőkábelt ne alakítsa át, ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítását, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé!
- Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből!
- Tárolja nem túl meleg, nem túl párás helyen, ne tegye ki erős napfénynek.
- Kerülje a meleg, párás helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket sokáig nem használja, húzza ki a kábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket. Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.
- Ne használja a készüléket fúvóka nélkül!
- Egyes szájvizek korróziót okozhatnak a készülékben, kérjük kerülje a szájvíz használatát!
- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!
- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájsebészeti beavatkozáson átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a szájhugany használatának javallatáról!
- A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza!

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

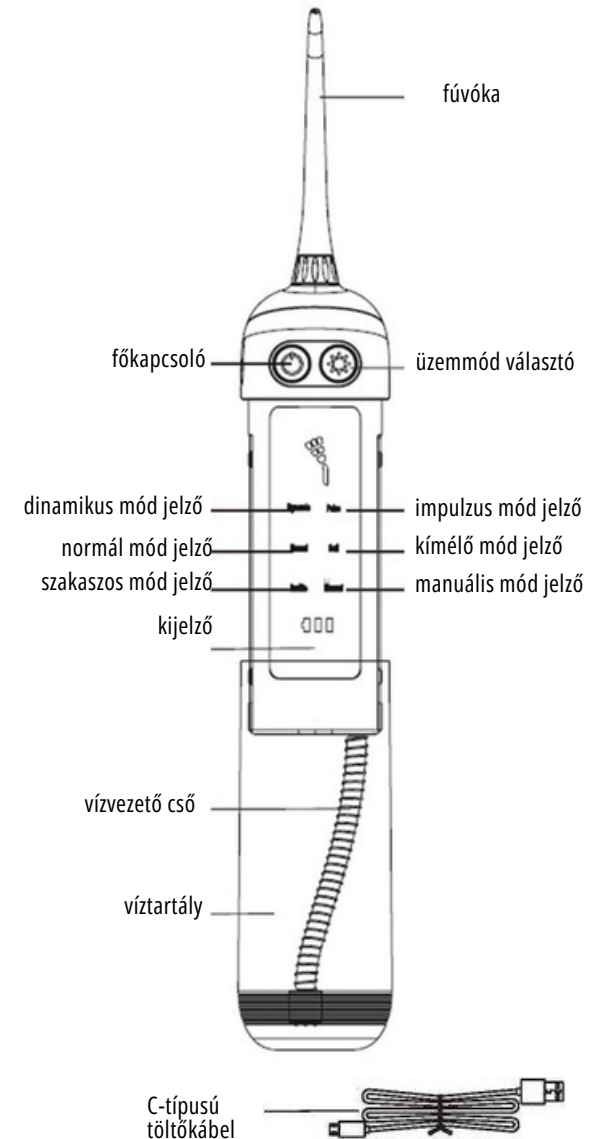

Tartozékok

Standard fúvóka: napi tisztításhoz.
Nyelvtisztító: Nyelvre tapadt lepedék eltávolítására.
Fogínytasak fúvóka: speciálisan az íny alatti terület tisztítására.
Fogszabályozó fúvóka: fogszabályozók, pótlások tisztítására.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használat előtt tölts fel a készüléket az alábbiak szerint.

1. Keze, a készülék, a vezeték legyenek Császartalazakok.ztassa az USB csatlakozót 5V-osomag nem (a tartalmazza, a legtöbb melyoebniltelefon-töltő rendelkezik adapterrel), és csatlakoztassa hészálózatához.

2cs. atlaNkyoiszstaas sa kaiz Ua B-ktáöblteóif emdáseljakt, véget a készülékhez. Javaslato:

Amennyiben a jelzőfény az jelez, az akkumulátor merülőben van, kérjük tölts fel a készüléket.

A teljes töltési idő 3-4 óra, ezalatt a fények jelzik, hol tart a folyamat. A teljes töltés elérésével a villogás leáll.

A szájhany használata:

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülék

végén lévő nyíláshoz. A fúvóka cseréjéhez nyomja a kioldógombot.

2. Töltsön vizet a tartályba az alábbi módszerek közül választva:

a. Egyik kezében a készülék testét tartva, másik kezével húzza le a tartályt

a(k önynebb, ha előtte kinyitja tartályfedele.) Első alkalommal előbb távolítsa el a ragasztó-fóliát. Tölts fel a tartályt, majd illessze össze a két részt.

b. Nyissa ki a tartályfedőt, tartsa függőlegesen a készüléket, tölts fel a tartályt, majd csukja vissza a fedelet.

3. Válassza ki a kívánt üzemmódot az

üzemmód-választó () gomb megnyomásával. Az üzemmódot működés közben is átállíthatja.

Az alábbi üzemmódot közül választhat:






Dynamic: Erős vízugar, kezdők számára nem javasolt.

Pulse: Váltakozó erősségű vízugar a mélytisztítás érdekében, és a fogíny masszírozásával.

Normal: Folyamatos, közepes erősségű vízugar, a napi tisztításhoz.

Soft: Gyengéd kíméletes vízugar, érzékeny fogak és íny tisztítására.

Burst fire: Pontos, precíz vízugar, főleg

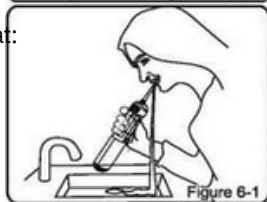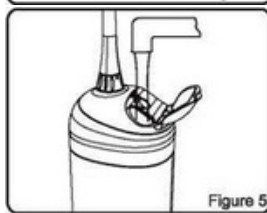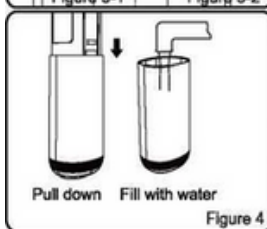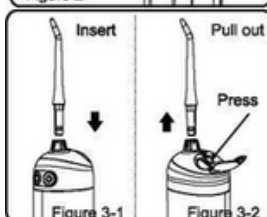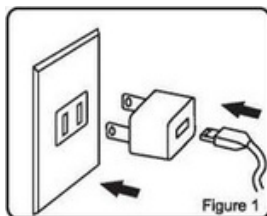

fogszabályozók tisztítására. Manual: A személyes igényeinkhez igazodó üzemmód.

Tipp:

Fogászok javaslatára kezdők az első héten a Soft üzemmódot alkalmazzák, majd, ha megszokták, próbáljanak ki más üzemmódokat is.

4. Használat előtt tartsa függőlegesen a szájhanyt, helyezze a fúvókát a szájába, illessze a fogakhoz/ínyhez, és nyissa résnyire a száját, hogy a folyadék távozhasson.

5. Csak ezután nyomja meg a bekapcsológombot (így nem fröcsköli

össze magát és környezetét). Használat közben az alábbiakra fordítson különös figyelmet:

a. A vízugar derékszöget kell, hogy bezárjon a fogakkal vagy az ínnyel;
b. Haladjon lassan végig a fogsorán, hogy minden fogat és a fogközöket is megfelelően megtisztítsa;

cín.yA fúvóka illeszkedjen az széléhez, és legyen párhuzamos az ínnyel;

Tippek:

Ne irányítsa a vízugarat közvetlenül a fogínytasakokba!

Használat után nyomja meg a főkapcsolót a kikapcsoláshoz.

A beépített időzítő 2 perc után automatikusan kikapcsol, de a főkapcsolóval újraindíthatja.

Használat utáni teendők:

1. Ürítse ki a víztartályt.
2. A főkapcsolóval ürítse ki a bennmaradt folyadékot.
3. Kapcsolja ki a készüléket, csukja össze, vegye le a fúvókát és helyezze a kifúvó nyílás belsejébe.
4. Törölje szárazra a szájhanyt.






Tippek:

A vízmaradék kiürítésével elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Ha sokáig nem használja a készüléket, akkor száradás után tisztítsa meg.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerezal tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő anyagokat, vagy 50 °C-nál melegebb vizet! A készülék tisztítása:

- Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa a készülék testét.

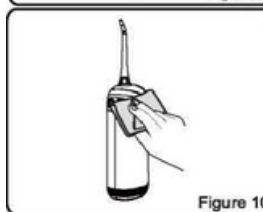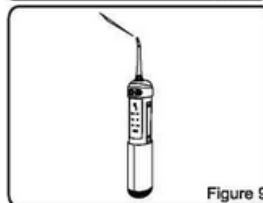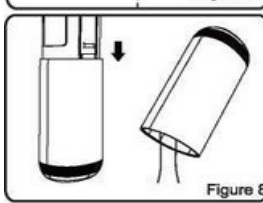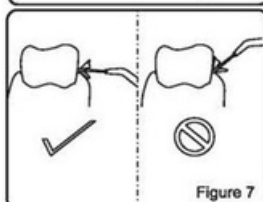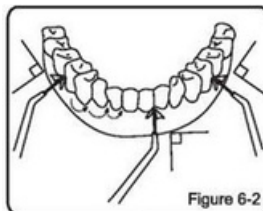

- Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából!

A víztartály tisztítása:

- A tartály száraz vagy nedves kendővel tisztítható, vagy a főegységről leválasztva tiszta vízzel előblíthető.
 - Ha sokáig nem használja a készüléket, kérjük, tisztítsa meg a tartályt.
- A fúvóka tisztítása:
- Száraz vagy nedves kendővel, vagy leválasztva tiszta vízzel öblítve.
 - Ne hajlítsa, húzza, csavarja a fúvókát.
 - Fogorvosok javaslatára ajánlott a fúvókát félévente cserélni.

HIBAELHÁRÍTÁS

hibajelenség	lehetséges okok	megoldás
A készülék leáll.	Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat.	Tölts fel 3 óránál hosszabb idő alatt.
Alacsony víznyomás, vagy nincs vízugar.	Fúvóka-eltömődés.	Cserélje le a fúvókát.
	A szűrő eltömődött.	Tisztítsa ki a szűrőt.
Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható.	Üresen működött.	Távolítsa el és öblítse át a fúvókát. Tölts fel a tartályt, majd vízszintesen tartva kapcsolja be a készüléket. Keresse fel a forgalmazót.
	Az akkumulátor elöregedett.	Töltse több, mint 3 órán keresztül.
A töltés-kijelző nem működik.	Nincs áram alatt a készülék.	Igazítsa meg/cserélje ki a töltő adkaapbteelrt és/vagy
	Töltési áramkör hiba.	Keresse fel a forgalmazót.

ARTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelepek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket a körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő feltételek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

Elállás a termék kibontását követően higiéniai okból nem lehetséges.