

Használati útmutató

Szónikus elektromos fogkefe

5 funkciós, IPx7 vízálló

T13



Forgalmazó: Spalazzomed Kft.
spalazzomed@spalazzomed.hu
spalazzomed.hu

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük olvassa el és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Fontos a használati utasítás megértése és betartása az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Ezért kérjük, feltétlenül sajátítsa el a készülék rendeltetészerű használatát, és őrizze meg az útmutatót.
- Kérjük csak rendeltetészerűen használja a készüléket (szájhygiéniai célra fejlesztett készülék). A nem rendeltetészerű használat garanciavesztéshez vezet! • A készülék szétszerelése, otthoni javítása tilos, áramütés veszélyét hordozza, és garanciaszáttal jár. Amennyiben működési hibát tapasztal, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

- Töltés közbeni véletlen vízbeejtés esetén azonnal húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, és csak ezután vegye ki a készüléket a vízből!
- Ne használjon sérült vezetéket vagy adaptert, cserélje ki a sérült kelleket!
- Sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Tartsa távol tűztől, és ne töltsen vagy tárolja hőforrás közelében!

EGYÉB FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket biztonságos helyen tárolja, hogy elkerülje a vízbeesést, vagy a leesés következtében okozott mechanikai sérüléseket.
- Ne próbálja meg a töltőkábelt fel- vagy lecsatlakoztatni vizes kézzel.

- A töltéshez a helyi hálózathoz illeszkedő adaptert használjon. • A töltőkábelt ne rongálja meg, kerülje annak túlzott nyújtását, erős hajlítását, csavarását, továbbá ügyeljen, hogy ne helyezzen rá nehéz tárgyat, és ne szorítsa más tárgyak közé! • Tisztítás és használat előtt húzza ki a töltőkábelt a készülékből! • Tárolja nem túl meleg, nem túl párány helyen, ne tegye ki erős napfénynek.

- Kerülje a meleg, párány helyeken történő töltést, mint pl. fürdőszoba.
- Ha a készüléket sokáig nem használja, húzza ki a kábelt és az adaptert.
- A készülék nem tartalmaz cserélhető vagy javítható alkatrészeket.

Üzemzavar esetén kérjük, keresse fel a forgalmazót.

- A terméket felnőttek számára fejlesztették, gyermekek számára az önálló használata tilos! Mozgásukban vagy mentális képességükben korlátozott személyek és gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete mellett használhatják, miután megfelelő iránymutatást kaptak a felnőttől a készülék biztonságos használatát illetően!


- Ez a készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.

- Komoly fogínybetegségben szenvedő, valamint 2 hónapon belül szájbézszereti beavatkozáson átesett betegek kérdezzék fogorvosukat a készülék használatának javallatáról! • A kábel eltávolításakor a vezeték helyett a dugót húzza!

- Kerülje a készülék hosszú ideig történő vízbe merítését. • Forduljon fogorvosához, ha a fogkefe használata során túlzott vérzés jelentkezik.

- Ne használja tovább a fogkefefejet, ha a sörték törtek vagy hajlottak.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

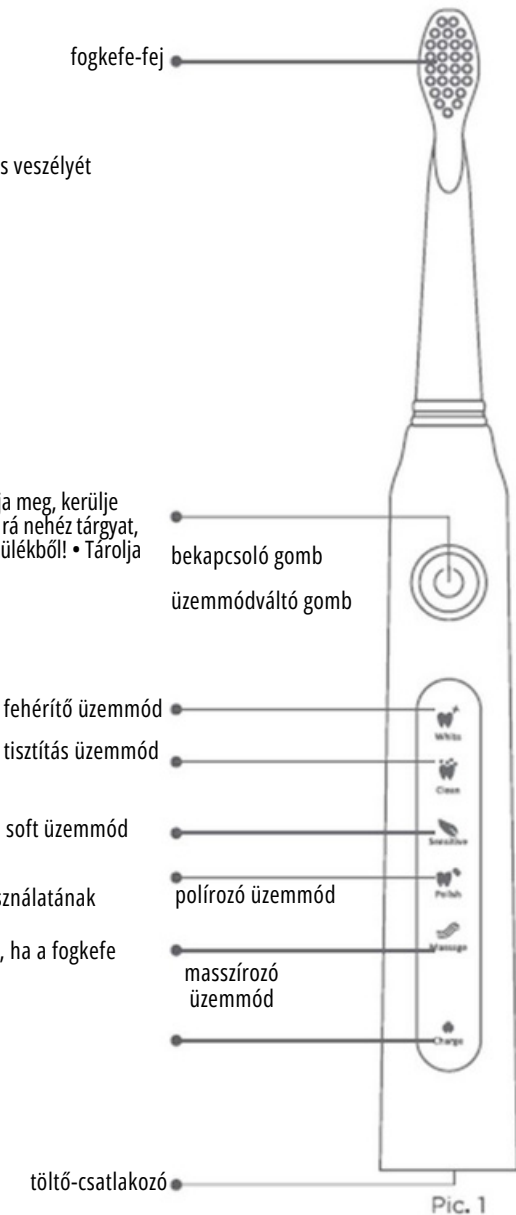

Pic. 1

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

Szónikus vibráció, 42 000 mikrozegés percenként, dinamikus tisztítás 5 fogmosási funkció:

fehérítő üzemmód
tisztító üzemmód
soft üzemmód
polírozó üzemmód
masszázs üzemmód

Egyedi kialakítású sörték, amelyek pontosan követik az egyes fogak felületét az íny és a nehezen elérhető területek alapos tisztításához.

2 perces intelligens időzítő 30 másodpercenkénti rezgésszünettel.

Cserélhető fogkefefejek.

Vízbehatolás elleni védelem mértéke: IPx7

USB töltés, egyszerű és kényelmes; otthoni vagy utazás közbeni használatra.

Hosszú élettartamú akkumulátor, egyszeri töltés akár 30 napos üzemidőt biztosít

SPECIFIKÁCIÓK

Áramforrás: DC5.0V A fogkefe anyaga: ABS/TPE Sörte: nylon Fogyasztás: 1.5W

Működési hőmérséklet: 0-50°C

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA Töltés

Használat előtt tölts fel a készüléket az alábbiak szerint. 1. Keze, a készülék, a vezeték legyenek szárazak. Csatlakoztassa az USB csatlakozót 5V-os adapterhez (a csomag nem tartalmazza, a


legtöbb mobiltelefon-töltő rendelkezik ilyen adapterrel), és csatlakoztassa a hálózathoz. 2. Csatlakoztassa a kábel másik végét a készülék alján található töltőnyíláshoz. A töltésszjelző lámpa (white üzemmód) felváltva világít, a többi üzemmód folyamatosan világít.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény folyamatosan világítani fog két percig, és nem villog többé. Két perc elteltével automatikusan kikapcsol. A fogkefe teljes feltöltése után napi kétszeri, alkalmanként kétperces használattal 20–45 napig használható. Javaslatok:

Ha az üzemmódjelző lámpa lassan villog a működés során, az azt jelzi, hogy a fogkefe alacsony töltöttségi szinten van. Kérjük, mihamarabb tölts fel a fogkefét.

A fogkefefeje cseréje

Nyomja a fogkefefejet a markolatra úgy, hogy a sörték a gomb és kijelző felé nézzenek, és az A illeszkedik T-vel. Kioldáshoz előbb csavarja el a fejet, majd válassza le a markolatról.

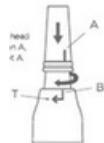

Az üzemmód kiválasztása

Válassza ki az Önnek tetsző fogmosási funkciót az "üzemmódváltó" gomb megnyomásával. 5 fogmosási funkció közül választhat: fehérítő üzemmód, tisztító üzemmód, soft üzemmód, polírozó üzemmód, masszázs üzemmód. A funkciók közötti váltáshoz ismételten nyomja meg az "üzemmódváltó" gombot.

Nedvesítse meg a sörtéket és tegyen kis mennyiségű fogkrémet a sörtékre. Hogy elkerülje a fogkrém fröccsenését, csak ezután kapcsolja be a fogkefét, hogy azt a szájába helyezte. Helyezze a fogkefe sörtéit a fogához úgy, hogy az kissé a fogíny széle felé dőljön.

A gombbal kapcsolja be a készüléket. Óvatosan tartsa a sörtéket a fogakon és a fogíny peremén. Mosson fogat a fogkefefeje finom előre-hátra mozgásával, hogy a sörték a fogak közé is bejussanak. ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fogakra, és ne alkalmazza a sörtéket egy adott területen hosszú ideig. A fogorvosok ajánlása szerint a fogmosást 2 percen át kell végezni, amelyben a szájüreg minden körnegyedére 30 másodperc jut.

Ha érzi a rezgésszünetet, lépjen a következő területre. A fogkefe 2 perc után automatikusan kikapcsol.

A fogmosási ciklus befejezése után további időt fordíthat a fogak rágó felületeinek és a foltos felületek mosására a gomb megnyomásával.

Tipppek:

Kezdők számára az első szónikus fogkefe-használat során szokatlan érzékenység jelentkezhet, amely normális jelenség, néhány használat után elmúlik. Amennyiben ez továbbra is fennmarad, vagy erős fájdalmat érez, keresse fel fogorvosát és függesse fel a fogkefe használatát! Fogorvosok javallatára kezdő szónikus fogkefe-használók először a Soft módot alkalmazzák, majd, ha azt megszokták, próbáljanak ki más üzemmódokat is.

A szónikus fogkefe intenzív sörtemozgása erős habzást okoz, ezért kevesebb fogkrém használata javasolt, a normál fogkefékhez viszonyítva.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A készüléket tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerezrel tisztítsa. Ne használjon maró, dörzsölő anyagokat, vagy 50 °C-nál melegebb vizet! Ne tisztítsa a fogkefefejet, és a fogkefe markolatot mosogatógépekben! Száraz, vagy nedves kendővel tisztítsa a készülék testét. Ne merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából! Háromhavonta cserélje a fogkefefejet. Amennyiben a kopás jelei mutatkoznak, hamarabb cserélje a fejet. Csak a gyártó által ajánlott fogkefefejjel használja a készüléket. A fogkefefejek elérhetőségéről érdeklődjön a forgalmazónál!

HIBAELHÁRÍTÁS

hibajelenség	lehetséges okok	megoldás
A készülék leáll.	Vásárlás után vagy hosszú állás után alacsony akkumulátor-töltöttség előfordulhat.	Töltse fel 3 óránál hosszabb idő alatt.
Rossz hatékonyság.	A fogkefefeje elöregedett, elkopott.	Cserélje le a fogkefefejet. Keresse fel a forgalmazót.
Feltöltött akkumulátorral is csak rövid ideig használható.	Az akkumulátor elöregedett. Elégtelen töltési idő.	Töltse több, mint 3 órán keresztül. Igazítsa meg/cserélje ki a töltő adkapcsot és/vagy
A töltés-kijelző nem működik.	Nincs áram alatt a készülék. Töltési áramkör hiba.	Keresse fel a forgalmazót.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülékben található újratölthető akkumulátor veszélyes hulladéknak minősül. A már nem használt, hibás készüléket ne dobja kommunális hulladékba, hanem a helyi szabályozások és lehetőségek felmérése után a megfelelő módon ártalmatlanítsa (szeméttelpek speciális részlege, lomtalanítás, elektronikai hulladékgyűjtők).

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket a körülményeknek megfelelően kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlás dátumát igazoló számlát. A következő feltételek garanciavesztéshez vezetnek: Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb. Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.

Elállás a termék kibontását követően higiéniai okból nem lehetséges.