

**Multifunkcionális arcszépítő készülék  
Felhasználói kézikönyv**

Otthoni használatra szánt stílusos szépségápolási eszköz, mely egyesíti a LED mikroáramú EMS, rádiófrekvenciás (RF), és ultrahang kezelések előnyeit. Speciális szérumok, krémek vagy gélek használata mellett olyan funkciókat nyújt, mint a bőr mélytisztítása, a sejtanycsere serkentése, a kollagén-képződés, a sejtmegújulás és a tápanyag-felszívódás elősegítése, a bőr rugalmasságának megtartása és feszesítése. Ezek hatására a bőr ragyogó, sima és feszes lesz.

**Forgalmazó:  
Dr. Katoki Kft.**

**[FIGYELMEZTETÉS]**

- Otthoni személyes felhasználású készülék, nem orvosi eszköz, rendeltetéstől eltérő orvosi használata tilos!
- Ne használja orvosi eszközökkel, készülékekkel együtt.
- Ne nézzen bele közvetlenül a LED fénybe, mert károsíthatja a szemet.
- Ha Ön szájszészeti műtéten esett át, vagy fogtömése van, kellemetlen érzést tapasztalhat az EMS kezelés során. Ilyen esetben csökkentse az EMS intenzitást, vagy kerülje ki az éntett területet.
- A készüléket vízbe meríteni tilos!
- Ügyeljen, hogy a kezelőfej ne csapódjon neki fémtárgyaknak, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne távolítsa el a beépített akkumulátort. Kerülje a magas hőmérsékletű környezetben vagy átmelegedett készülék töltését. Az akkumulátor kizárólag a helyi szabályozásnak megfelelő hulladéktárolóba helyezhető el, és lehetőség szerint újrahasznosításáról gondoskodni kell. Az akkumulátort és az akkumulátort tartalmazó készüléket tűzbe dobni tilos!
- Mindig a dobozban mellékelt USB-C típusú kábelt használja a készülék akkumulátorának újratöltéséhez!
- A doboz hálózati adaptert nem tartalmaz. Használjon USB-kábelhez csatlakoztatható adaptert (pl. mobiltelefon töltő). Ellenőrizze, hogy az adapteren feltüntetett feszültség egyezik-e a specifikációkkal (DC 5V/1A).
- A töltőkábelt és adaptert száraz kézzel érintse, az áramütés elkerülése érdekében.
- Töltés közben ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelre, mert az meghibásodáshoz, vagy akár tűzhöz vezethet! Meghibásodás jeleinek észlelése esetén áramtalanítson és távolítsa el a kábelt és az adaptert a hálózatról, hogy elkerülje az áramütést.
- Figyeljen az adapter és a kábel helyes csatlakozására a tűz és áramütés elkerülése érdekében.
- A készülék használatát azonnal fel kell függeszteni amennyiben bármilyen meghibásodás, károsodás, elektromos zavar jeleit észleli. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

**Specifikációk**

Modell	SKB -2003
Méret	175*161*50mm
Tömeg	170g
Töltési feszültség	DC 5V/1A
Névleges feszültség	3,7 V
Névleges teljesítmény	13 W
Akkumulátor kapacitás	1300 mAh
Töltési idő	kb. 100-150 perc
Működési idő egy töltéssel	kb. 60-120 perc
Időzítő	6 perc
Elérhető funkciók	3
Intenzitás-szintek	3
Forgalmazó	Dr. Katoki Kft.

**[VESZÉLY]**

- Arckezelésre fejlesztett készülék, kérjük ne használja rendeltetéstől eltérő módon.
- Kellemetlen érzés, bőrpír vagy viszketés jelentkezések jelezze fel a készülék használatát.
- Tilos a használata:
  - 18 éves kor alatt
  - Ha Ön terhes, szoptat vagy éppen menstruál
  - Ha Önnek pacemaker-e, fém-implantátuma van, vagy arcpasztyikában részesült
  - Ha Ön fizikai, neurológiai vagy szenzoros nehézségekkel küzd
  - Akut megbetegedése van, tuberkulózisa, vagy egyéb súlyos betegsége van (szívelégtelenség, arhythmia, rákos megbetegedés, vérnyomás-problémák)
  - Rossz a közérzete, lázas beteg, kimerült. Intenzív testedzés alatt vagy ittasan ne használja!
  - Fertőző betegségben szenved, allergiás, bőrbetegségben, bőrgyulladásban vagy örökletes bőrbetegségben szenved.
  - Sebek, akne, gyulladás, vörös, viszkető területek, sötét anyajegyek, vírusos szemölcsök kikerülendők.
- \*Amennyiben bizonytalan, kérjük konzultáljon bőrgyógyászával a készülék használata előtt.
- Tilos a szemgolyó, szemhéj és a gége területén használni!
- Ez a készülék RF (rádiófrekvencia) révén melegítőfunkcióval rendelkezik. Amennyiben Ön nem jól érzelki a hőt, kérjük fokozott figyelemmel járjon el.
- A RF funkció használata alatt figyeljen oda, hogy a kezelőfej elektrodája érintkezzen a bőrfelülettel, és ne tartózkodjon hosszú ideig ugyanazon a ponton – így elkerülheti az égési sérüléseket.
- Tilos a készülék szétszerelése, a burkolat megbontása, a készülék bármilyen módosítása. A szakszerűtlen szerelés áramütést okozhat, személyi sérüléshez és a készülék károsodásához vezethet. A készülék szerelése a jótállást semmissé teszi.

**[FIGYELEM]**

- Gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol.
- Tárolja közvetlen hőforrástól, nyílt lángtól. Ne tárolja alacsony hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyiségben, kerülje az esőnek és közvetlen napfénynek kitett helyeket.
- Tartsa távol gyúlékony anyagoktól, mint az alkohol, oldószerek vagy sprayk.
- Kérjük, kerülje el a készülék leejtését, amely a készülék sérüléséhez vezethet, és a garancia alá nem tartozik.
- Töltse fel a készülék akkumulátorát az első használat előtt, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Vizsgálja meg, hogy a gombok és a kijelző LEDek megfelelően működnek-e.
- Teljes feltöltés után távolítsa el az USB-kábelt, a folyamatos túltöltés károsíthatja a készülék akkumulátorát.
- Amikor nem használja, kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a kábelt.
- Győződjön meg a kezelőfej teljes illeszkedéséről, és lassan mozgassa azt a bőrön. Ha túl melegnek érzi, akkor mozgathatja gyorsabban is.
- A készüléket használhatja tonizáló termékkel, magas hatóanyag-tartalmú esszenciával vagy géllal. Használat után nedves kendővel tisztítsa meg a kezelőfejet.
- Csak olyan krém vagy olaj állagú kozmetikumot használjon a kezeléshez, amely nem lép kölcsönhatásba az ultrahanggal.
- A kezelés előtt igyon vizet a hidratáció érdekében.
- Az első kezelés előtt végezzen bőrtesztet, hogy kizárja az egyéni érzékenységet. Előbb alacsony fokozaton használja a készüléket, majd fokozatosan növelheti azt.

**Hibaelhárítás**

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
Nem kapcsol be a készülék.	Nem megfelelő gombnyomás.	Tartsa nyomva a Be/ki gombot 2 másodpercig.
	Alacsony töltöttség.	Tölts fel az akkumulátort.
Nem lehet feltölteni az akkumulátort.	Nincs bekapcsolva a készülék.	Kapcsolja be a készüléket.
	A kábel nem megfelelően van csatlakoztatva.	Igazítsa meg a töltőkábelt.
Az EMS kezelés hatása nem érzékelhető.	Száraz bőr	Használjon lotion vagy géll állagú kozmetikumot a hidratására.
	Túl alacsony EMS intenzitás szint.	Fokozatosan növelje az EMS intenzitást.
Túl erős EMS stimuláció.	Túl magas EMS intenzitás	Csökkentse az intenzitást.
Az RF melegítő hatása nem érzékelhető.	Túl alacsony RF intenzitás	Fokozatosan növelje az RF intenzitást.
	2 másodperces téttlenség miatt bekapcsolt a védelmi funkció.	Mozgassa a kezelőfejet és kapcsolja be az RF funkciót ismét.
Túl magas RF hőmérséklet.	Túl magas RF intenzitás	Csökkentse az RF intenzitást.
	Túlmelegedés hosszú használat után.	Függesztesse fel az RF használat ideiglenesen.
Az ultrahang hatása nem érzékelhető.	Normális jelenség, a magas frekvenciájú ultrahang nem okoz bőrirritációt.	Cseppentsen egy vízcseppet a kezelőfejen elektrodájára, ha vibrál a bőrén.


**Jótállás**

A vásárlás napjától számítva 2 év garanciát vállalunk. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket lehetőség szerint kicseréljük. Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlási számlát. A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek:

- Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb.
- Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Leejtés, erős fizikai behatás okozta sérülések, a karbantartás elmulasztása miatti károk (szennyeződések ellenére használat).
- Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használata, vagy a helytelen használata miatt.


A termék higiéniai terméknek minősül. Amennyiben a csomagolás felbontásra került, vagy a kipróbálás jelei látszódnak a terméken, úgy a 14 napos elállási jog érvényét veszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján.

## A készülék felépítése

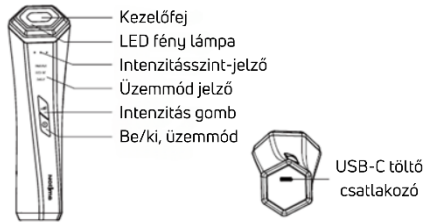

## A készülék használata

### 1. Bőrteszt

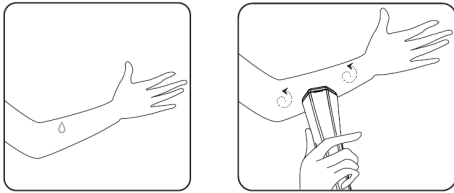

Az első használatot megelőzően végezzen bőrtesztet, hogy megállapíthassa, az Ön bőre kezelhető-e a készülékkel.

1. Tisztítsa meg az alkar belső felét.
2. Vigyen fel egyenletesen tonizáló terméket, magas hatóanyag-tartalmú esszenciát vagy gélt a kezelendő területre.
3. Kapcsolja be a készüléket, helyezze a kezelőfejet közvetlenül a bőrre úgy, hogy a teljes kezelőfej érintkezzen a bőrrel. Mozgassa a kezelőfejet lassan körkörös irányban, üzemmódonként 1-2 percig.
4. Távolítsa el a kozmetikum maradványait, szennyeződéseket a bőréről, és vizsgálja meg a bőrt.
5. Ha kipirosodott, vagy viszket, erős bizsergést érez, ne használja tovább a készüléket, és tisztítsa meg a bőrt tiszta vízzel.
6. Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, ne használja ezt a készüléket.
7. Ha nem tapasztal bőrpírt, duzzanatot, viszketést a következő 24 órában, akkor Ön nyugodtan használhatja a készüléket.

### 2. A készülék használata

1. Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan a főkapcsolót (Be/ki gomb, 2 másodperc). Egy csipogó hang jelzi a bekapcsolást. Ekkor automatikusan az első, 3MCAVI üzemmódba lép a készülék.
2. Kikapcsolás: Hosszan nyomva a főkapcsolót (Be/ki gomb, 2 másodperc). Két csipogás jelzi a kikapcsolást.
3. Üzem mód-váltás: A bekapcsolt készüléken a főkapcsoló gomb rövid megnyomása segítségével válthat a 3 üzemmód között. Az aktuálisan kiválasztott üzemmóddhoz tartozó jelzőfény világít.
4. Intenzitás-beállítás: A bekapcsolt készülék intenzitás gombjának rövid megnyomásakor az alacsony-közepes-magas sorrendben válthat fokozatot. Az aktuális intenzitást a

3 LED jelzi. Üzem mód-váltáskor az intenzitás-fokozat nem változik.

5. Időzítő funkció: A visszaszámlálás 6 percről automatikusan elindul minden üzemmód elindításakor. 3 perc után emlékeztető csipogás hallható, ami segít eldönteni, mikor térjünk át a másik arcfélre. 6 perc után az aktuális üzemmód kikapcsol, az üzemmód-jelző villogni kezd, és 1 perc tétlenség után a készülék automatikusan kikapcsol. Üzem mód-váltáskor az időzítő újraindul.

### 3. A funkciók leírása


Üzem mód	3MCAVI	RED RF	DAILY
Funkciók	Ultrahang  Alacsony frekvenciájú rezgés	Vörös fény  Rádió-frekvencia (RF)	Vörös fény  EMS
Intenzitás	3 szint: alacsony-közepes-magas (LOW-MEDIUM-HIGH)		
Időzítő	6 perc (3 perces emlékeztető)		

### 4. Használati útmutató

Emlékeztető: A frekvencia és az időzítés a bőr állapotához igazítható. Ugyanazon üzemmód folyamatos használata, vagy ugyanazon bőrfelület hosszútávú kezelése károsíthatja a bőrt, ezért fontos a készülék szakszerű és mértékletes használata. Ne feledkezzen el a megfelelő hidratálásról, igyon vizet kezelés előtt és után.

#### 1) 3MCAVI üzemmód

Az ultrahangos és alacsony frekvenciájú rezgésekkel mélyebbre hatol a bőrbé, hogy hidratálja azt, fokozza a tápanyagok felszívódását, enyhítse a szárazságot, fényesebbé és rugalmasabbá tegye a bőrt.

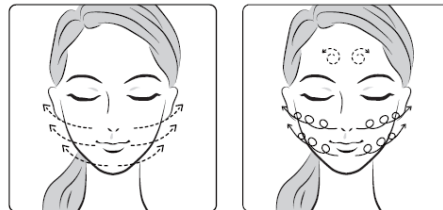


- a) Távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg az arcát.
- b) Vigyen fel egyenletesen hidratáló szérumot.
- c) Kapcsolja be a készüléket, válassza ki a 3MCAVI üzemmódot, győződjön meg róla, hogy a kezelőfej szorosan érintkezik a bőrrel, lassan csúsztassa belülről kifelé vagy körkörös mozdulatokkal az arcán.
- d) Javasoljuk, hogy a készülék használata után alkalmazzon bőrpoló termékeket a bőr hidratálására.

\*\* Használja heti 2-3 alkalommal

#### 2) RED RF üzemmód

A vörös fény és a rádiófrekvencia (RF) felgyorsíthatja a kollagénképződést, fokozhatja a sejtek regenerálódását, ezáltal elősegítheti a bőr rugalmasságát.

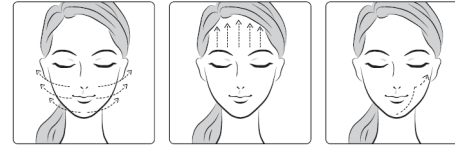


- a) Távolítsa el a sminket és alaposan tisztítsa meg az arcot.
- b) Vigyen fel egyenletesen tonikot vagy szérumot/gélt.
- c) Indítsa be a készüléket, és válassza ki a RED RF üzemmódot, csúsztassa a kezelőfejet a bőrön.  
Orcán: Belülről kifelé  
Homlokon: Alulról felfelé  
Arc körvonalán: Felfelé az álltól az arcon át a halántékig  
d) Javasoljuk, hogy a készülék használata után használjon bőrpoló termékeket a bőr hidratálására és hidratálására.

\*\* Használja heti 2-3 alkalommal

#### 3) DAILY üzemmód

A vörös fény javíthatja a sejtek vitalitását, a mikroáram (EMS) pedig stimulálja az izmokat és ezáltal feszesítheti a bőrt.

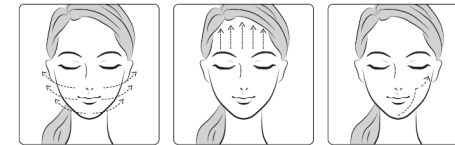

- a) Távolítsa el a sminket és alaposan tisztítsa meg az arcot.
- b) Vigyen fel egyenletesen tonikot vagy szérumot/gélt.
- c) Indítsa be a készüléket, és válassza ki a DAILY üzemmódot, csúsztassa a kezelőfejet a bőrön.  
Orcákon: Belülről kifelé  
Homlokon: Alulról felfelé  
Arc körvonalán: Felfelé az álltól az arcon át a halántékig  
d) Javasoljuk, hogy a készülék használata után használjon bőrpoló termékeket a bőr hidratálására.

\*\*Használja napi 1-2 alkalommal, reggel és/vagy este.

Megjegyzés: Ne használja a terméket a szemgolyó, a szemhéj vagy a gége területén!

### 5. A készülék töltése

- 1) A doboz nem tartalmazza a hálózati adaptert. Kérjük, töltsse fel az akkumulátort egy DC 5V/1A adapterrel.
- 2) Kérjük, hogy szobahőmérsékleten töltsse fel.
- 3) Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, háromszor hallható hangjelzés, a kijelző 5 alkalommal villog, majd a készülék kikapcsol.
- 4) Töltsse a mellékelt Type-C kábellel, és csatlakoztassa a főegység alján lévő töltőporthoz. Az akkumulátor jelzőfénye töltés közben villog, és mind a 3 lámpa folyamatosan világít, miután teljesen feltöltődött.
- 5) Teljes töltés után húzza ki a hálózati adaptert és távolítsa el az USB töltőkábelt.
- 6) A terméket töltés közben használni tilos!

## Tisztítás, karbantartás, tárolás

1. Kikapcsolt állapotban tisztítsa a készüléket. Töltés közben tisztítani tilos!
2. Ne használjon forró vizet, mosószert, alkoholt, benzint vagy vegyszereket a tisztításhoz.
3. Tisztításkor ne merítse vízbe.
4. Az elektródát és a főegységet nedves ruhával törölje át, majd száraz kendővel szárítsa meg.
5. Szárítsa meg a terméket hűvös és jól szellőző helyen, majd tárolja a mellékelt tárolótáskában.
6. Ha hosszú távon nem használja, töltsse fel az akkumulátort 2 havonta.
7. Ne helyezze a készüléket egyenetlen felületre vagy magas helyekre, hogy elkerülje a leesésből eredő sérüléseket vagy a készülék sérülését.
8. Tartsa a terméket gyermekek elől elzárva.