



A vattakorong felhelyezése

(Tisztítás üzemmód)

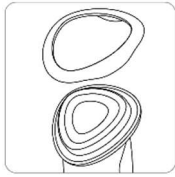

1. Vedd le a műanyag gyűrűt.

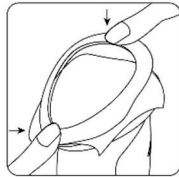

2. Rögzítsd a vattakorongot: Előbb az éles sarkot rögzítsd, majd nyomd le a másik kezdeddel a korong rögzítéséhez.



3. Rögzítsd a vattalapot.



4. Önts sminklemosót vagy tiszta vizet a korongra, és válaszd ki a **CLEANSING** üzemmódot.

Jótállás

A vásárlás napjától számítva 1 év garanciát vállalunk. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

A jótállási idő alatt az anyagból vagy a termék gyártási folyamatából eredő meghibásodások esetén a terméket lehetőség szerint kicseréljük.

Garanciális csere igénylésekor be kell nyújtania a forgalmazónak a készüléket és a vásárlási számlát.

A következő esetek garanciavesztéshez vezetnek:

- Nem rendeltetészerű használatból eredő károk, pl. tápegység vagy aljzat nem megfelelő használatából eredő sérülések stb.
- Normál használat okozta öregedés és elhasználódás. Leejtés, erős fizikai behatás okozta sérülések, a karbantartás elmulasztása miatti károk (szennyeződések ellenére használat).
- Ha problémák merülnek fel a más célra történő használat vagy a nem a gyártó által szállított alkatrészek használat, vagy a helytelen használat miatt.

A termék higiéniai terméknek minősül. Amennyiben a csomagolás felbontásra került, vagy a kipróbálás jelei látszódnak a terméken, úgy a 14 napos elállási jog érvényét veszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján.

Specifikációk

Modell	SKB -1909
Méret	58,53*165mm
Tömeg	165g
Névleges feszültség	5 V
Névleges teljesítmény	4 W
Töltési idő	3 óra
Intenzitás-szintek	3
Forgalmazó	Dr. Katoki Kft.

A termék ártalmatlanítására vonatkozó óvintézkedések

Kérjük, támogassa az újratölthető elemek (lítium-ion akkumulátorok) újrahasznosítását.

	<ul style="list-style-type: none">• Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használjon más típusú akkumulátort. Ne tölts fel az eltávolított akkumulátort.• Ne dobja tűzbe, mert balesetveszélyes.• Ne szúrja ki, ne tegye ki gravitációs behatásnak, illetve ne nyissa fel, ne szerelje meg a készüléket.• Az akkumulátor pozitív és negatív elektródáit ne kösse össze közvetlenül fémmelel.• Ne tárolja nyakláncokkal, hajtűkkel stb. együtt.• Ne tölts, ne használja és ne tárolja hőforrás közelébe, pl. tűz mellé vagy napfénynek kitéve. A fentiek hő, tüzet és sérülést okozhatnak.
	<ul style="list-style-type: none">• Tartsa az eltávolított újratölthető akkumulátort gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a véletlen lenyelést.• Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!• Ha az akkumulátor folyadék szívárog, ne nyúljon bele a folyadékba pusztán kézzel!• Ha a folyadék szembe kerül, az vaksághoz vezethet. Ne dörzsölje a szemét, azonnal mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz!• Ha az akkumulátorfolyadék bőrre vagy ruházatra kerül, irritációt vagy sérülést okozhat. Öblíts le tiszta vízzel, és ha továbbra is kellemetlenséget tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.• Ha javításra van szükség, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.

A termék lítium-ion akkumulátorai értékes erőforrások, amelyek újrahasznosíthatók és regenerálhatók. Kérjük, hogy a készüléket ezért kizárólag elektronikai hulladéktárolóba helyezze, hogy a hulladékkezelő gondoskodhasson az akkumulátorok újrahasznosításáról.

Biztonsági óvintézkedések

1. Arcplasztikában, bőr alatti fémbeültetésben részesült személyek, magas vérnyomással, bőrszerekkel és gyulladással, allergiával küzdők, terhesség és szoptatás időszakában lévő nők nem használhatják ezt a készüléket.
2. A használatkor a készülék törzsének hátsó felületén található érzékelőfelületet kell megfognia (marokra fogni), és ha egyidejűleg a kezelőfej érintkezik a bőrrel, a rendszer egy mikroáramkört képez és a készülék működésbe lép.
3. A bőr egészsége érdekében kérjük, az eszközt ne használja „szárazon”, mindig alkalmazzon kozmetikai készítményt. Ezzel a megfelelő siklást is elősegíti.
4. Az eszköz alkalmazható az arcra és a nyakra, elkerülve a sebeket és a gennyes pattanásokat.
5. Használat után törölje le a masszázsflejt papírtörülkövel. Ne öblítse le vízzel.
6. Ha egy másik személy arcán kell használni, akkor a felhasználó végtagjával érintkeznie kell, hogy hurkot képezzen, különben az eszköz nem tud normálisan működni.
7. A készülék használatkor bőrápolási termékek vagy szemránckrém használata kötelező, ne nyomja rá szárazon a bőrre.
8. Tárolja száraz, hűvös helyen, kerülje a magas páratartamú és közvetlen napfénynek kitett helyeket.

Égési sérülés veszélye

- A készülék felülete forró lehet, a hőérékenységükben korlátozott személyek vegyék figyelembe a használat során.
- Ha úgy érzi, hogy a kezelőfej túlmelegszik, kérjük, azonnal távolítsa el.

Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdés	Válasz
Hogyan érzem el, hogy működésbe lépjen a készülék?	A készülék használatkor a főegység hátsó borítójának érzékelőfelületét kell érinteni, ha a kezelőfej érintkezői is a bőrhöz érnek, áramkört képez az emberi testtel, ekkor lép működésbe.
Nehezen siklik az eszköz az arcon. Mit tegyek?	Ha nem siklik a kezelőfej, a bőrápoló termék valószínűleg felszivódott. Vigyen fel további kozmetikumot, vagy fejezze be a kezelést.
„Áramütést” érzek kezelés közben.	Használat közben az „áramérzet” normális. Ha ez az érzet kellemetlenné válik, váltson alacsonyabb fokozatra. Amikor megszokja az érzést, emelheti a fokozatot.
Használat után kellemetlen érzést tapasztalok a bőrömon.	Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. A legjobb, ha pontosan leírja a kezelés menetét, akár fényképekkel, hogy az ügyfélszolgálat hatékony segítséget biztosíthasson.
Mennyi ideig tart a töltés? Használható töltés közben is?	A töltési idő körülbelül 3 óra. A készüléket töltés közben nem lehet bekapcsolni, kérjük, használja töltés után.

Notime




Multifunkcionális arcszépítő készülék (4 in 1) Felhasználói kézikönyv

Otthoni használatra szánt szépségápolási eszköz, mely egyesíti a Tisztítás, Hatóanyag-bevitel, Lifting, Szemkörnyék-ápolás és Hűtés funkciókat, a bőr táplálására és regenerálására összpontosítva.


Forgalmazó:
Dr. Katoki Kft.

A készülék felépítése

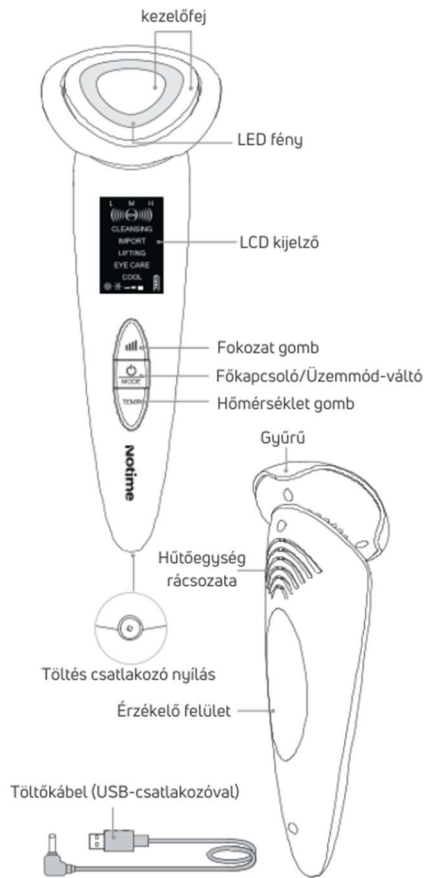

A készülék használata

Tisztító üzemmód - CLEANSING

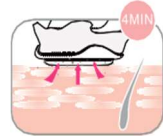

Pozitív ion export + hő + rezgés, a bőr mély rétegeiből is eltávolítja a pórusokban lévő maradék szennyeződések, valamint a bőrfelületen lévő felesleges olajat. Ez a mélytisztítás felszabadítja a pórusokat, és tisztábbá teszi a bőrt.

Használja: vattakoronggal és sminklemosóval vagy tiszta vízzel.




1. Vegye le a gyűrűt;
2. Rögzítse a vattakorongot;
3. Öntsön rá sminklemosót / tiszta vizet;
4. Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a főkapcsolót míg a képernyő bekapcsol;
5. Válassza a CLEANSING módot;
6. A készülék érzékelőfelületét marokra fogva, körkörösén masszírozza az arcát belülről kifelé.

•Használat gyakorisága: Heti 2-3 alkalom, érzékeny izmok esetén 1-2 alkalomra csökkenthető.


•Használat időtartama: legfeljebb 4 perc/alkalom, érzékeny izmok esetében 1-2 perc/alkalom.

Hatóanyag-bevitel - IMPORT

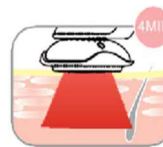

A negatív ion hatóanyag-import segítségével hatékony táplálást érünk el, bőrfitalítással kombinálva a vörös LED fényterápiával + hő + rezgés a vérkeringés élénkítésére, és a tápláló hatóanyagoknak a dermisz rétegbe történő bejuttatására. A bőrápoló termékek penetrációs aránya háromszorosára nő.

Használja: hidratáló/öregedésgátló maszkkal, hialuronsav-, oligopeptid szerummal, magas vitamintartalmú zselével vagy más koncentrált hatóanyagot tartalmazó készítménnyel.

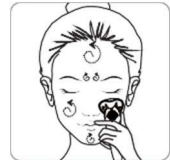


1. Vigye fel az arcára a kozmetikumot;
2. Válassza az IMPORT módot;
3. A készülék érzékelőfelületét marokra fogva, körkörösén masszírozza az arcát belülről kifelé;
4. Ha úgy érzi, hogy a kezelőfej ellenállása megnőtt, az arra utal, hogy a kozmetikai termék felszívódott. Pótolja azt, vagy folytassa a bőrápolást a következő lépéssel. (Ne használja szárazon!).

•Használat gyakorisága: Naponta egyszer, érzékeny izmok esetén igény szerint csökkenthető.

•Használat időtartama: legfeljebb 4 perc/alkalom, érzékeny izmok esetében 1-2 perc/alkalom.

LIFTING üzemmód

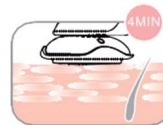

Az EMS izomstimuláció és a hőkezelés kettőse javíthatja az arckontúrt, feszesíti az izmokat. A hőkezelés serkenti a mikrokeringést és élénkíti a bőr anyagcseréjét.

Használja: Kezelőzselével.




1. Vigyen fel megfelelő mennyiségű kezelőzselét az arcra vagy a kezelőfejre;
2. Válassza ki a LIFTING üzemmódot;
3. A készülék érzékelőfelületét marokra fogva, mozgassa a kezelőfejet az arc középvonalától kifelé és alulról felfelé;
4. Ha úgy érzi, hogy a kezelőfej elakadt, az azt jelenti, hogy a gél mennyisége csökkent. Vigyen fel több gél, vagy fejezze be a kezelést.

•Használat gyakorisága: naponta használható.

•Használat időtartama: 4-8 perc ajánlott.

Szemkörnyéki ápolás - EYE CARE

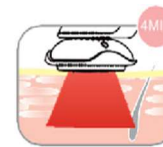

Állandó melegítés + mikrovibráció, szemránckrém vagy szérum/esszencia használata mellett, a hatóanyagok felszívódásának elősegítésére.

Halványíthatja a sötét karikákat, csökkentheti a szem puffadtságát, és enyhítheti a szem fáradtságát.

Használja: szemápoló krémmel, maszkkal, esszenciával.




1. Vigye fel a kozmetikumot a szemkörnyékre egyenletesen;
2. Válassza ki az EYE CARE üzemmódot, majd nyomja meg röviden a Fokozat gombot a vörös fény be- vagy kikapcsolásához;
3. A kezelőfejjel masszírozza át a szem környékét.

•Használat gyakorisága: Használhatja naponta reggel és este. Érzékeny izmok esetén a használat gyakorisága csökkenthető.

•Használati időtartam: legfeljebb 2 perc/alkalom oldalanként (összesen 4 perc), érzékeny izmok esetében 1 perc/alkalom oldalanként, összesen 2 perc a kezelés idő.

Hűsítő üzemmód - COOL

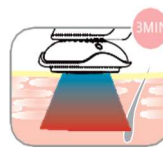

A gyors lehűtés enyhíti a bőrpírt és nyugtatja a pattanásos bőrt. A kék fény képes elpusztítani az akne kialakulásáért felelős P. acnes baktériumokat, ezzel megakadályozza a gyulladás terjedését, megelőzi a pattanások kialakulását. Lezárja a pórusokat, feszesíti és finomítja a bőrt.

Használja: nyugtató/regeneráló maszkkal.




1. Helyezzen nyugtató/javító maszkot az arcára;
2. Válassza ki a COOL üzemmódot;
3. Nyomja rá a bőr érzékeny vagy piros és forró területeire, mindegy területen legfeljebb 5 másodpercig tartsa rajta a kezelőfejet.

•Használat gyakorisága: Hetente 2-3 alkalommal.

•Használati időtartam: minden egyes területen legfeljebb 5 másodpercig tartsuk a kezelőfejet a fagyás elkerülése érdekében.


Bőrápolási rutin

Reggeli bőrápolás

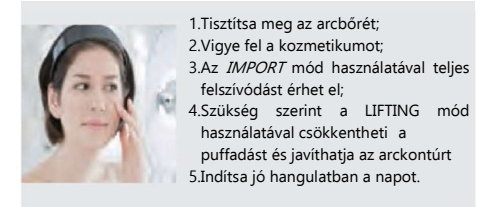

1. Tisztítsa meg az arcát;
2. Vigye fel a kozmetikumot;
3. Az IMPORT mód használatával teljes felszívódást érhet el;
4. Szükség szerint a LIFTING mód használatával csökkentheti a puffadást és javíthatja az arckontúrt
5. Indítsa jó hangulatban a napot.

Esti bőrápolás

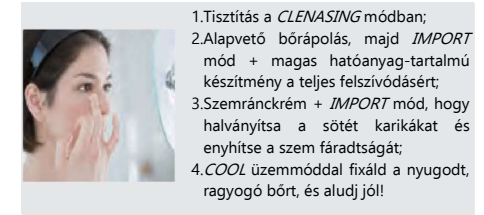

1. Tisztítás a CLEANSING módban;
2. Alapvető bőrápolás, majd IMPORT mód + magas hatóanyag-tartalmú készítmény a teljes felszívódásért;
3. Szemránckrém + IMPORT mód, hogy halványítsa a sötét karikákat és enyhítse a szem fáradtságát;
4. COOL üzemmóddal fixáld a nyugodt, ragyogó bőrt, és aludj jól!

Kijelző



1. Nyomja meg hosszan (3 másodperc) a Power/Mode gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Nyomja meg röviden a Power/Mode gombot az üzemmód kiválasztásához.
3. Amikor megnyomja a Power/Mode gombot, a CLEANSING - IMPORT - LIFTING - EYE CARE - COOL üzemmódok váltakoznak a kijelzőn.

4. Nyomja meg röviden a Fokozat gombot az intenzitás váltásához. Amikor a Fokozat gombot röviden megnyomja, az intenzitás ciklikusan változik a L (gyenge), M (közepes), H (erős) sorrend szerint. Az intenzitás-fokozatok a CLEANSING, IMPORT és LIFTING módban érhetők el.

5. Nyomja meg röviden a TEMP gombot a melegítési fokozat beállításához. Amikor a TEMP gombot röviden megnyomja, a fűtési intenzitás az alacsony, közepes, magas melegítési intenzitás sorrend szerint változik. A fűtési intenzitás-fokozatok a CLEANSING, IMPORT és LIFTING módban érhetők el.

6. EYE CARE üzemmódban használja a Fokozat gombot a vörös fény funkció ki/bekapcsolásához.

Töltés

Amikor a töltés megkezdődik, sípoló hangjelzés hallatszik, és az akkumulátor jelzősávja villogni kezd. Az akkumulátor jelzősáv a töltés után körülbelül 3 órán át világít, majd a villogás megszűnik, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött. Ekkor húzza ki a tápegységet.

